

LIN@AR
care on wheels



MALVESTIO®
Made in Italy

Carrelli di reparto

Medical trolleys

Carros medicos

Chariots medicaux



ROBUSTEZZA

Linkar combina materiali plastici e acciaio in una sintesi leggera, resistente e adattabile ad ogni necessità. Il suo scopo è la funzionalità: ogni elemento è comodamente estraibile per una facile manutenzione igienica.

MODULARITÀ

Linkar è uno strumento di lavoro quotidiano pratico e versatile: le combinazioni di dimensioni e colori dei cassetti e la predisposizione per numerosi accessori permettono di configurare Linkar per qualsiasi esigenza di reparto.

DESIGN

Linkar è progettato con la convinzione che l'estetica delle finiture migliora la vita dei pazienti e il lavoro degli operatori. Con il suo ventaglio di colori, le linee morbide e gli spigoli arrotondati, Linkar porta negli ambienti ospedalieri tutto il design e lo stile italiano.

VERSATILITÀ

Per il personale sanitario, un carrello realmente guidabile, scorrevole, leggero e silenzioso è indispensabile per il lavoro di tutti i giorni. Linkar è dotato dei migliori plus funzionali per muoversi agilmente in corsia e fra i letti.

ERGONOMIA

Il design funzionale dei carrelli Linkar impiega un'intelligente combinazione di piani di lavoro, maniglioni di spinta e impugnature delle maniglie dei cassetti per garantire una postura corretta e prevenire l'affaticamento e lo stress del personale sanitario.



STRENGTH

Linkar combines plastic materials with steel in a synthesis that is both light and sturdy and that can be adapted to every need. Its purpose is functionality: every element can be easily extracted to facilitate cleaning operations.

MODULARITY

Linkar is a handy and versatile daily work tool: thanks to the combinations of size and colour for drawers and to the possibility of featuring several accessories, Linkar can be configured to meet any requirement of hospital wards.

DESIGN

Linkar was studied in the firm belief that design improves the life of patients and the work of operators. With its wide choice of colours, soft shapes and smooth edges, Linkar brings Italian style and design to hospital facilities.

VERSATILITY

A truly manoeuvrable, agile, light and noiseless trolley is essential for the daily work of healthcare operators. Linkar has all the functional advantages to move nimbly along the wards and between the beds.

ERGONOMICS

The functional and ergonomic design of the new trolleys Linkar and the configuration their of worktops, push-handles and drawer handles, foster a correct posture reducing stress and fatigue in medical staff.



ROBUSTEZ

Linkar combina materiales plásticos y acero en una síntesis liviana, resistente y adaptable a cada necesidad. Su objetivo es la funcionalidad: cada elemento es cómodamente extraíble para una fácil limpieza de mantenimiento.

MODULARIDAD

Linkar es un instrumento de trabajo cotidiano práctico y versátil: las combinaciones de medidas y colores de los cajones y las disposiciones para muchos accesorios Linkar permiten crear configuraciones para cualquier exigencia de reparto.

DISEÑO

Linkar ha sido proyectado bajo el convencimiento que la estética de los acabados mejora la vida de los pacientes y el trabajo de los operadores. Con su abanico de colores, las líneas suaves y las esquinas suavizadas, Linkar lleva a los ambientes hospitalarios todo el diseño y el estilo italiano.

VERSATILIDAD

Para el personal sanitario, un carro muy manejable, deslizante, liviano y silencioso, indispensable para el trabajo de todos los días. Linkar está dotado de los mejores detalles funcionales para moverse con agilidad en los pasillos y entre las camas.

ERGONOMÍA

El diseño funcional de los carros Linkar emplea una combinación inteligente de superficies de trabajo, manijas de empuje y empuñaduras de los tiradores de cajones que garantiza una posición correcta y previene el esfuerzo y el estrés del personal sanitario.



SOLIDITÉ

Linkar combine les matières plastiques et l'acier en une synthèse légère, résistante qui s'adapte à toutes les nécessités. Son but est la fonctionnalité : chaque élément est amovible pour faciliter l'entretien hygiénique.

MODULARITÉ

Linkar est un instrument de travail quotidien pratique et polyvalent: les combinaisons de dimensions et couleurs des tiroirs et la possibilité d'application de nombreux accessoires permettent de configurer Linkar pour toutes les exigences du service.

DESIGN

Linkar a été conçu dans la conviction que l'aspect esthétique des finitions améliore la qualité de vie des patients et du travail des opérateurs. Avec sa gamme de couleurs, ses lignes souples et ses arêtes douces, Linkar apporte dans le milieu hospitalier le design et le style italien.


POLYVALENCE

Pour le personnel sanitaire, un chariot vraiment facile à conduire, glissant, léger et silencieux est indispensable pour le travail de chaque jour. Linkar est équipé du nec plus ultra pour pouvoir se déplacer avec agilité dans les salles d'hôpital et entre les lits.

ERGONOMIE

Le design fonctionnel des chariots Linkar utilise une combinaison intelligente des plans de travail, barres de poussée et poignées des tiroirs pour garantir une posture correcte et prévenir la fatigue et le stress du personnel sanitaire.

Cassetto - drawer cajón - tiroir

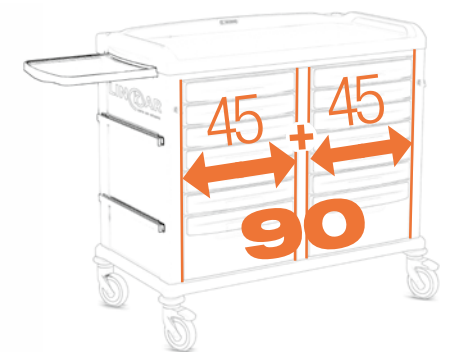



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Il corpo strutturale del carrello è realizzato tramite assemblaggio di materiali compositi, ognuno dei quali scelto per ottimizzare la funzionalità, l'affidabilità e la sanificazione del prodotto. Definido da un attento studio ergonomico, garantisce la massima stabilità in ogni condizione d'uso ed offre un'ottima manovrabilità, anche a pieno carico.

Struttura autoportante, realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche con **TRATTAMENTO ANTIMICROBICO** che garantisce un grado superiore di igiene e sanificazione.

Il carrello, caratterizzato da linee arrotondate, prive di angoli e spigoli vivi, permette una sanificazione ottimale.

Il vano frontale è attrezzato con cassette con bordi arrotondati, e **MANIGLIE INTEGRATE INTERCAMBIABILI COLORATE**, complete di portaetichette, o con vano a giorno (dove previsto).

Le maniglie, ergonomiche e di facile presa, sono disponibili nei colori: rosso, giallo, verde, blu e grigio. I cassetti sono montati su guide in acciaio, ad **ESTRAZIONE TOTALE**, con richiamo in chiusura e sistema di sganciamento a leva. La chiusura dei cassetti è ottenuta tramite **CHIUSURA CENTRALIZZATA** posizionata sul bordo frontale di serie.

Il fianco destro è dotato, di serie, di 2 barre metalliche laterali per l'aggancio di accessori. Nella versione singola da 45 e 60 il fianco sinistro è dotato di 3 **CASSETTI RECLINABILI** di serie, in materiale plastico traslucido e con apertura a 40°, rimovibili per consentirne la pulizia e sanificazione. Nella versione da 90 sono previste 2 barre laterali su entrambi i fianchi. Il top superiore è realizzato in materiale plastico, ABS termoformato, antiurto ed antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile. Sul lato sinistro è dotato, di serie, di **PIANO DI LAVORO SUPPLEMENTARE ESTRAIBILE**. Il top è completo di bordo frontale rialzato per il contenimento dei liquidi, di alzatina integrata su tre lati con funzione di maniglione di spinta. La sagomatura interna all'alzatina laterale permette una facile presa e manovrabilità del carrello. Predisposizione, sugli angoli posteriori del top, per l'inserimento della struttura superiore porta accessori, nelle due versioni: h 30 cm o h 60 cm, o di ulteriori supporti. Il basamento in materiale plastico, ABS termoformato, antiurto ed antigraffio, è facilmente lavabile e disinfettabile. Completo di ruote paracolpi, in gomma, è dotato di 4 ruote piroettanti, diametro 125 mm, di cui 2 frontali con freno a pedale montate su **TELAIO IN ACCIAIO**. Nelle versioni emergenza e broselow sono previste 2 ruote antistatiche di serie.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

El cuerpo estructural del carro se realiza ensamblando los materiales, cada uno de los cuales se ha elegido para optimizar la funcionalidad, fiabilidad e higiene del producto. Definido gracias a un cuidadoso estudio ergonómico, garantiza la máxima estabilidad en cualquier condición de uso y ofrece una maniobrabilidad excelente, incluso con carga completa.

Estructura autoportante, realizada con chapa de acero pintada con polvos exopixídicos con **TRATAMIENTO ANTIMICRÓBICO** que garantiza un grado superior de higiene y esterilización.

El carro, caracterizado por líneas redondeadas, carece de esquinas y aristas y permite una higienización excelente.

El compartimento frontal posee cajones con bordes redondeados y **TIRADORES INTEGRADOS INTERCAMBIABLES DE COLOR**, con portaetiquetas o con compartimento abierto (si está previsto).

Los tiradores, ergonómicos y de fácil sujeción, se encuentran disponibles en los siguientes colores: rojo, amarillo, verde, azul y gris. Los cajones se montan sobre guías de acero, se **EXTRAEN COMPLETAMENTE**, con autocierre y sistema de desenganche de leva. El cierre de los cajones se consigue mediante **CIERRE CENTRALIZADO** colocado en el borde frontal de serie.

El costado derecho está dotado de serie de 2 barras metálicas laterales para el enganche de accesorios. En la versión individual de 45 y 60 el costado izquierdo está dotado de 3 **CAJONES RECLINABLES** de serie, de material plástico traslúcido con abertura de 40° y extraíbles que facilitan la limpieza y la desinfección. En la versión de 90 se prevén 2 barras laterales a ambos costados. La superficie superior es de material plástico, ABS termomoldeado, antigolpe y antirayado, fácil de lavar y de desinfectar. El lado izquierdo está dotado de serie de una **SUPERFICIE DE TRABAJO SUPLEMENTARIA EXTRAÍBLE**. La superficie posee un borde frontal elevado para contener los líquidos y un reborde integral en los tres lados restantes con función de tirador de empuje.

El moldeado interno del borde lateral permite asir con facilidad y ofrece gran maniobrabilidad al carro. Predisposición, en las esquinas posteriores de la superficie, para la inserción de la estructura superior porta accesorios, en las dos versiones: 30 y 60 cm de altura o de otros soportes.

La base superior es de material plástico, ABS termomoldeado, antigolpe y antirayado, fácil de lavar y de desinfectar. Posee ruedas paragolpes, de goma, 4 ruedas giratorias de 125 mm de diámetro, de las cuales 2 frontales con freno a pedal montadas en el **BASTIDOR DE ACERO**. En las versiones emergencia y broselow se prevén 2 ruedas antiestáticas de serie.



GENERAL CHARACTERISTICS

The structural body of the trolley is made by assembling composite materials, each one of which is chosen to optimise the functionality, reliability and sanitising of the product. Defined by an attentive ergonomic study, it guarantees maximum stability in every condition of use and offers excellent manoeuvrability, even when fully loaded.

Self-bearing structure, made of epoxy powder coated steel sheet and with an **ANTIMICROBIAL TREATMENT** that ensures a higher degree of hygiene and sanitation. The trolley, characterised by rounded lines, without corners and sharp edges, allows optimum sanitation.

The front compartment is fitted with drawers with rounded edges, and **INTEGRATED INTERCHANGEABLE COLOURED HANDLES**, complete with label-holder.

Where foreseen, the compartment may be left open.

The ergonomic, easy-grip handles are available in red, yellow, green, blue and grey.

The drawers are fitted on **TOTAL EXTRACTION** steel guides, with spring damper closure and lever-operated unhooking system.

As a standard, the drawers are closed by means of a **CENTRALIZED LOCKING SYSTEM** located on the front.

As a standard, the right side is provided with 2 metal accessory-holder bars.

As a standard, in the 45 and 60 cm single version, the left side is equipped **3 FLAP-DOWN DRAWERS**, in translucent plastic, with a 40° opening angle; the drawers can be removed for cleaning and sanitation. In the 90 cm version there are 2 side bars on both sides.

The top is made of thermoformed ABS plastic, impact- and scratch-resistant, easy to wash and disinfect. As a standard, the left side is equipped with an **ADDITIONAL PULL-OUT WORKTOP**.

The top is complete with a raised fluid retaining front edge and a built-in raiser on three sides which can be used as a push handle. The internal shaping of the built-in raiser provides an easy grip and enhances the manoeuvrability of the trolley. The trolley can be equipped with an upper accessory-holder structure fixed on the rear corners of the top, in two versions: h 30 cm or h 60 cm, or with further supports. The base made of thermoformed ABS plastic, impact- and scratch-resistant, is easy to wash and disinfect. Complete with rubber bumper wheels, it is equipped with 4 swivel wheels with diameter 125 mm, of which 2 at the front with a **FOOT-OPERATED BRAKE**. As a standard, the Emergency and Broselow versions have 2 antistatic wheels.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

La structure du chariot est fabriquée par assemblage de matériaux composites, chacun étant choisi pour optimiser la fonctionnalité, la fiabilité et la désinfection du produit. Défini par une étude ergonomique, il garantit le maximum de stabilité dans toutes les conditions d'utilisation et offre une excellente manoeuvrabilité, même à pleine charge. Structure autoportante, fabriquée en tôle d'acier peinte à la poudre époxy avec **TRAITEMENT ANTIMICROBIEN** qui garantit un degré supérieur d'hygiène et désinfection. Le chariot, caractérisé par des lignes arrondies, sans coins et arêtes vives, sera désinfecter de manière optimale. Le compartiment frontal est équipé de tiroirs avec des bords arrondis, et des **POIGNÉES INTERCHANGEABLES COLORÉES INTÉGRÉES**, avec porte-étiquettes ou niche ouverte (au choix). Les poignées ergonomiques à prise en main facile, sont disponibles dans les couleurs suivantes : rouge, jaune, vert, bleu et gris. Les tiroirs sont montés sur des glissières en acier, à **EXTRACTION TOTALE**, avec rappel en fermeture et système de décrochage à levier. Les tiroirs se ferment moyennant une **FERMETURE CENTRALISÉE** placée sur le bord frontal de série. Le côté droit est équipé, de série, de 2 barres métalliques latérales pour l'accrochage d'accessoires.

Dans la version simple de 45 et 60 le flanc gauche est équipé de 3 **TIROIRS INCLINABLES** de série, en matière plastique translucide et avec ouverture à 40°, amovibles pour en permettre le nettoyage et la désinfection.

Dans la version de 90 sont prévues 2 barres latérales des deux côtés.

Le plan supérieur en matière plastique, ABS thermoformé, antichoc et anti-rayures, est facilement lavable et désinfectable.

De série est prévu sur le côté droit, un **PLAN DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE EXTRACTION**. Le plan supérieur est équipé d'un bord frontal rehaussé pour retenir les liquides, et de rebords sur les trois côtés avec fonction de poignée de poussée.

La forme de l'intérieur du dossier latéral garantit la prise en main facile et la manoeuvrabilité du chariot. Sur les angles postérieurs du plan supérieur est prévue l'introduction de la structure supérieure porte-accessoires, dans les deux versions : h 30 cm ou h 60 cm, ou de supports supplémentaires.

Le plan supérieur en matière plastique, ABS thermoformé, antichoc et anti-rayures, est facilement lavable et désinfectable. Équipé de butées pare-chocs, en caoutchouc, il est équipé de 4 roulettes pivotantes, diamètre 125 mm, dont 2 frontales avec frein à pédale montées sur **CHÂSSIS EN ACIER**. Dans les versions urgence et broselow 2 roulettes antistatiques sont prévues de série.



portaetichette
label holder
porta etiquetas
porte-étiquettes



ruota antistatica con freno
antistatic wheel with brake
rueda antiestática con freno
roue antistatique avec frein



maniglia di spinta
push handle
tirador de empuje
poignée de poussée



lastra massaggio cardiaco
cardiac massage board
placa masaje cardiaco
plaque pour massage cardiaque



ruote montate su telaio in acciaio
wheels mounted on a steel frame
ruedas montadas sobre
bastidor de acero
roulettes montées sur châssis
en acier




asta portaflebo
telescopica
telescopic I.V. pole
tige porte-sérum
télescopique
soporte suero
telescópico



cassetti reclinabili
flap-down drawers
tiroirs inclinables
cajones reclinables



chiusura centralizzata
central lock
cierre centralizado
fermeture centralisée

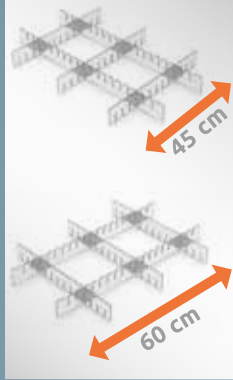

kit divisori per cassetti
divider kit for drawers
kit divisorios para cajones
set de diviseurs de tiroirs




piano estraibile
pull-out worktop
superficie estraibile
plan extractible



barre portaccessori
accessory holder bars
barras porta accesorios
barres porte-accessoires



pianetto portadefibrillatore rotante - revolving defibrillator holder tray
tablero rotativo porta desfibrilador - plan de support défibrillateur pivotant

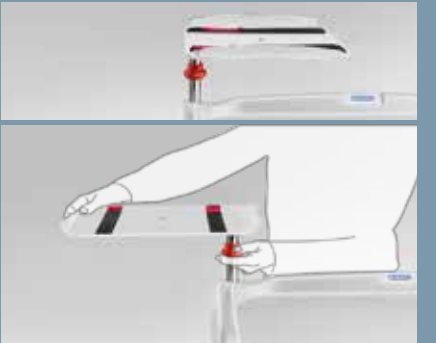

Emergenza - Emergency
Emergencia - Urgence



329501

Dim.
cm 74x70x104/144 h
Kg 60



Di serie

- 2 cassetti h 7,5 cm, maniglia rossa
- 2 cassetti h 15 cm, maniglia rossa
- 1 cassetto h 22,5 cm, maniglia rossa
- 1 asta portaflebo regolabile in altezza, a 4 ganci
- 1 pianetto portadefibrillatore
- 1 porta bombola ossigeno
- 1 lastra massaggio cardiaco posteriore
- 1 kit 2 ruote antistatiche
- Chiusura centralizzata con sigillo monouso
- 100 sigilli monouso
- Pianetto estraibile

Piano di lavoro cm 100 h



Standard

- 2 drawers h 7,5 cm, red handle
- 2 drawers h 15 cm, red handle
- 1 drawer h 22,5 cm, red handle
- 1 adjustable-height I.V. rod with 4 hooks
- 1 defibrillator holder tray
- 1 oxygen cylinder holder
- 1 cardiac massage board
- 1 kit of 2 antistatic wheels
- Centralized locking system with single-use seals
- 100 single-use seals available
- Pull-out worktop

Worktop h 100 cm



De serie

- 2 cajones h 7,5 cm, tirador rojo
- 2 cajones h 15 cm, tirador rojo
- 1 cajón h 22,5 cm, tirador rojo
- 1 soporte suero de altura regulable con 4 ganchos
- 1 tablero porta desfibrilador
- 1 porta bombona de oxígeno
- 1 placa masaje cardiaco posterior
- 1 kit 2 ruedas antiestáticas
- Cierre centralizado con precinto desechable
- 100 precintos desechable
- Superficie extraíble

Superficie de trabajo de 100 cm h



Portabombola ossigeno
Oxygen cylinder holder
Placa masaje cardiaco
Plaque pour massage cardiaque

Lastra massaggio cardiaco
Cardiac massage board
Porta bombona de oxígeno
Porte-obus à oxygène



De série

- 2 tiroirs h 7,5 cm, poignée rouge
- 2 tiroirs h 15 cm, poignée rouge
- 1 tiroir h 22,5 cm, poignée rouge
- 1 tige porte-sérum réglable en hauteur, à 4 crochets
- 1 plan de support porte-défibrillateur
- 1 porte-obus à oxygène
- 1 plaque massage cardiaque postérieure
- 1 set 2 roulettes antistatiques
- Fermeture centralisée avec sceau à usage unique
- 100 sceaux à usage unique
- Plan extractible

Plan de travail h 100 cm



329504

Dim.
cm 89x70x104/144 h
Kg 67



Di serie

- 2 cassetti h 7,5 cm, maniglia rossa
- 2 cassetti h 15 cm, maniglia rossa
- 1 cassetto h 22,5 cm, maniglia rossa
- 1 asta portaflebo regolabile in altezza, a 4 ganci
- 1 pianetto portadefibrillatore
- 1 porta bombola ossigeno
- 1 lastra massaggio cardiaco posteriore
- 1 kit 2 ruote antistatiche
- Chiusura centralizzata con sigillo monouso
- 100 sigilli monouso
- Pianetto estraibile

Piano di lavoro cm 100 h



Standard

- 2 drawers h 7,5 cm, red handle
- 2 drawers h 15 cm, red handle
- 1 drawer h 22,5 cm, red handle
- 1 adjustable-height I.V. rod with 4 hooks
- 1 defibrillator holder tray
- 1 oxygen cylinder holder
- 1 cardiac massage board
- 1 kit of 2 antistatic wheels
- Centralized locking system with single-use seals
- 100 single-use seals available
- Pull-out worktop

Worktop h 100 cm



De serie

- 2 cajones h 7,5 cm, tirador rojo
- 2 cajones h 15 cm, tirador rojo
- 1 cajón h 22,5 cm, tirador rojo
- 1 soporte suero de altura regulable con 4 ganchos
- 1 tablero porta desfibrilador
- 1 porta bombona de oxígeno
- 1 placa masaje cardiaco posterior
- 1 kit 2 ruedas antiestáticas
- Cierre centralizado con precinto desechable
- 100 precintos desechable
- Superficie extraíble

Superficie de trabajo de 100 cm h



Kit sigilli numerati per chiusura cassetti

Kit of numbered seals

Kit precinto numerados para cierre cajones

Set de sceaux numérotés pour fermeture tiroirs



De série

- 2 tiroirs h 7,5 cm, poignée rouge
- 2 tiroirs h 15 cm, poignée rouge
- 1 tiroir h 22,5 cm, poignée rouge
- 1 tige porte-sérum réglable en hauteur, à 4 crochets
- 1 plan de support porte-défibrillateur
- 1 porte-obus à oxygène
- 1 plaque massage cardiaque postérieure
- 1 set 2 roulettes antistatiques
- Fermeture centralisée avec sceau à usage unique
- 100 sceaux à usage unique
- Plan extractible

Plan de travail h 100 cm



60 cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329512

Dim.
cm 89x60x104/144 h
Kg 67



Di serie

- 9 cassetti h 7,5 cm, maniglia neutra con etichetta colorata
- 1 asta portaflebo regolabile, in altezza, a 4 ganci
- 1 supporto universale
- 1 kit di 2 ruote antistatiche
- 100 sigilli monouso
- Chiusura centralizzata con chiave
- Pianetto estraibile

Piano di lavoro h 100 cm



Standard

- 9 drawers h 7,5 cm, neutral handle with coloured label
- 1 kit Broselow system coloured labels
- 1 adjustable-height I.V. rod with 4 hooks
- 1 universal support
- 1 kit of 2 antistatic wheels
- Centralized locking system with single-use seals
- 100 single-use seals available
- Pull-out worktop

Worktop h 100 cm



De serie

- 9 cajones 7,5 h cm, tirador neutro con etiqueta de color
- 1 soporte suero de altura regulable con 4 ganchos
- 1 soporte universal
- 1 kit de 2 ruedas antiestáticas
- 100 precintos desechable
- Cierre centralizado con llave
- Superficie extraíble

Superficie de trabajo h 100 cm



De série

- 9 tiroirs h 7,5 cm, poignée neutre avec étiquette colorée
- 1 tige porte-sérum réglable en hauteur, à 4 crochets
- 1 support universel
- 1 set 2 roulettes antistatiques
- 100 sceaux à usage unique
- Fermeture centralisée avec clé
- Plan extractible

Plan de travail h 100 cm



329512-C

Dim.
cm 78x60x104/144 h
Kg 67



Art. 3299340

- Contenitore giallo per piccoli rifiuti
- Yellow container for small waste
- Contenedor amarillo para residuos pequeños
- Récipient jaune pour déchets de petites dimensions



Art. 3299915_60

- Kit divisori per cassetto con larghezza 60 cm ed h 7,5 cm
- Divider kit for drawer with width 60 cm and h 7.5 cm
- Kit divisorios para cajón 60 cm de ancho y 7,5 cm de altura
- Set de diviseurs de tiroirs largeur 60 cm et h 7,5 cm



Art. 303336

- Nastro Broselow
- Broselow guidelines
- Cinta Broselow
- Bande Broselow

45 cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329516

Dim.
cm 74x60x104/171 h
Kg 63



Di serie

- 3 cassetti h 15 cm, maniglia blu
- 1 cassetto h 22,5 cm, maniglia verde
- 1 struttura superiore porta accessori a 2 barre
- 1 kit 9 cassetti a ribalta (5+4)
- 1 doppio gancio portaflebo per struttura superiore
- 1 supporto per bacinella reniforme
- 1 vaschetta disinfezione con supporto per struttura superiore
- 1 supporto universale
- 1 contenitore giallo per piccoli rifiuti
- Chiusura centralizzata
- Pianetto estraibile

Piano di lavoro h 100 cm



Standard

- 3 drawers h 15 cm, blue handle
- 1 drawer h 22,5 cm, green handle
- 1 upper accessory-holder structure with 2 bars
- 1 kit of 9 flap-down drawers (5+4)
- 1 double hook for I.V. for upper structure
- 1 support for kidney dish
- 1 disinfection basin with support for upper structure
- 1 universal support
- 1 yellow container for small waste
- Centralized locking system
- Pull-out worktop

Worktop h 100 cm



De serie

- 3 cajones h 15 cm, tirador azul
- 1 cajón h 22,5 cm, tirador verde
- 1 estructura superior porta accesorios de 2 barras
- 1 kit 9 cajones basculantes (5+4)
- 1 gancho doble porta suero para estructura superior
- 1 soporte para cubeta riñonera
- 1 recipiente desinfección con soporte para estructura superior
- 1 soporte universal
- 1 contenedor amarillo para residuos pequeños
- Cierre centralizado
- Superficie extraíble

Superficie de trabajo h 100 cm



329516-C

Dim.
cm 62x60x104/171 h
Kg 63



De série

- 3 tiroirs h 15 cm, poignée bleue
- 1 tiroir h 22,5 cm, poignée verte
- 1 structure supérieure porte accessoires à 2 barres
- 1 set 9 tiroirs rabattables (5+4)
- 1 double crochet porte sérum pour structure supérieure
- 1 support pour bassin réniforme
- 1 cuvette de désinfection avec support pour structure supérieure
- 1 support universel
- 1 récipient jaune pour déchets de petites dimensions
- Fermeture centralisée
- Plan extractible

Plan de travail h 100 cm

60 cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329519

Dim.
cm 89x60x104/171 h
Kg 72



Di serie

- 3 cassetti h 15 cm, maniglia blu
- 1 cassetto h 22,5 cm, maniglia verde
- 1 struttura superiore porta accessori a 2 barre
- 1 kit 9 cassetti a ribalta (5+4)
- 1 doppio gancio portaflebo per struttura superiore
- 1 supporto per bacinella reniforme
- 1 vaschetta disinfezione con supporto per struttura superiore
- 1 supporto universale
- 1 contenitore giallo per piccoli rifiuti
- Chiusura centralizzata
- Pianetto estraibile

Piano di lavoro h 100 cm



Standard

- 3 drawers h 15 cm, blue handle
- 1 drawer h 22,5 cm, green handle
- 1 upper accessory-holder structure with 2 bars
- 1 kit of 9 flap-down drawers (5+4)
- 1 double hook for I.V. for upper structure
- 1 support for kidney dish
- 1 disinfection basin with support for upper structure
- 1 universal support
- 1 yellow container for small waste
- Centralized locking system
- Pull-out worktop

Worktop h 100 cm



De serie

- 3 cajones h 15 cm, tirador azul
- 1 cajón h 22,5 cm, tirador verde
- 1 estructura superior porta accesorios de 2 barras
- 1 kit 9 cajones basculantes (5+4)
- 1 gancho doble porta suero para estructura superior
- 1 soporte para cubeta riñonera
- 1 recipiente desinfección con soporte para estructura superior
- 1 soporte universal
- 1 contenedor amarillo para residuos pequeños
- Cierre centralizado
- Superficie extraíble

Superficie de trabajo h 100 cm



329519-C

Dim.
cm 78x60x104/171 h
Kg 72



De série

- 3 tiroirs h 15 cm, poignée bleue
- 1 tiroir h 22,5 cm, poignée verte
- 1 structure supérieure porte accessoires à 2 barres
- 1 set 9 tiroirs rabattables (5+4)
- 1 double crochet porte sérum pour structure supérieure
- 1 support pour bassin réniforme
- 1 cuvette de désinfection avec support pour structure supérieure
- 1 support universel
- 1 récipient jaune pour déchets de petites dimensions
- Fermeture centralisée
- Plan extractible

Plan de travail h 100 cm

Medicazione - Medication - Medicación - Soins

45

cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329517

Dim.
cm 74x60x104/171 h
Kg 61



Di serie

3 cassetti h 15 cm, maniglia blu
1 cassetto h 22,5 cm, maniglia verde
1 struttura superiore porta accessori
a 2 barre
1 kit 9 cassetti a ribalta (5+4)
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

Piano di lavoro h 100 cm



Standard

3 drawers h 15 cm, blue handle
1 drawer h 22,5 cm, green handle
1 upper accessory-holder structure
with 2 bars
1 kit of 9 flap-down drawers (5+4)
Centralized locking system
Pull-out worktop

Worktop h 100 cm

45

cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329518

Dim.
cm 74x60x163 h
Kg 61



Di serie

3 cassetti h 15 cm, maniglia blu
1 cassetto h 22,5 cm, maniglia verde
1 struttura superiore porta accessori
a 2 barre
2 mensole grandi inox con 3 divisori
in plastica
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

Piano di lavoro h 100 cm



Standard

3 drawers h 15 cm, blue handle
1 drawer h 22,5 cm, green handle
1 upper accessory-holder structure
with 2 bars
2 large stainless steel shelves with
3 plastic dividers
Centralized locking system
Pull-out worktop

Worktop h 100 cm



60

cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329520

Dim.
cm 89x60x104/171 h
Kg 70



De serie

3 cajones h 15 cm, tirador azul
1 cajón h 22,5 cm, tirador verde
1 estructura superior porta accesorios
de 2 barras
1 kit 9 cajones basculantes (5+4)
Cierre centralizado
Superficie extraible

Superficie de trabajo h 100 cm



De série

3 tiroirs h 15 cm, poignée bleue
1 tiroir h 22,5 cm, poignée verte
1 structure supérieure porte accessoires à
2 barres
1 set 9 tiroirs rabattables (5+4)
Fermeture centralisée
Plan extractible

Plan de travail h 100 cm

60

cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329521

Dim.
cm 89x60x163 h
Kg 70



De serie

3 cajones h 15 cm, tirador azul
1 cajón h 22,5 cm, tirador verde
1 estructura superior porta accesorios
de 2 barras
2 repisas grandes de acero inox con
3 divisorios
de plástico
Cierre centralizado
Superficie extraible

Superficie de trabajo h 100 cm



De série

3 tiroirs h 15 cm, poignée bleue
1 tiroir h 22,5 cm, poignée verte
1 structure supérieure porte
accessoires à 2 barres
2 grandes étagères inox avec 3
séparateurs en plastique
Fermeture centralisée
Plan extractible

Plan de travail h 100 cm

Medicazione - Medication - Medicación - Soins

90

cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329522

Dim.
cm 114x60x104/171 h
Kg 91



Di serie

3+3 cassetti h 15 cm, maniglia blu
1+1 cassetto h 22,5 cm, maniglia verde
1 struttura superiore porta accessori
with 2 barre
1 kit 9 cassetti a ribalta (5+4)
2 mensole inox con 1 divisorio in plastica
1 doppio gancio portaflebo per struttura
superiore
1 supporto per bacinella reniforme
1 vaschetta disinfezione con supporto
per struttura superiore
1 supporto universale
1 contenitore giallo per piccoli rifiuti
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

Piano di lavoro h 100 cm



Standard

3+3 drawers h 15 cm, blue handle
1+1 drawer h 22,5 cm, green handle
1 upper accessory-holder structure
with 2 bars
1 kit of 9 flap-down drawers (5+4)
2 stainless steel shelves with 1 plastic
divider
1 double hook for I.V. for upper structure
1 support for kidney dish
1 disinfection basin with support for
upper structure
1 universal support
1 yellow container for small waste
Centralized locking system
Pull-out worktop

Worktop h 100 cm



De serie

3+3 cajones h 15 cm, tirador azul
1+1 cajón h 22,5 cm, tirador verde
1 estructura superior porta accesorios
de 2 barras
1 kit 9 cajones basculantes (5+4)
2 repisas de acero inox con 1 divisorio
de plástico
1 gancho doble porta suero para e
structura superior
1 soporte para cubeta riñonera
1 recipiente desinfección con soporte
para estructura superior
1 soporte universal
1 contenedor amarillo para residuos
pequeños
Cierre centralizado
Superficie extraible

Superficie de trabajo h 100 cm

90

cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329523

Dim.
cm 114x60x104/171 h
Kg 90



Di serie

3+3 cassetti h 15 cm, maniglia blu
1+1 cassetto h 22,5 cm, maniglia verde
1 struttura superiore porta accessori
a 2 barre
1 kit 9 cassetti a ribalta (5+4)
2 mensole inox con 1 divisorio in plastica
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

Piano di lavoro h 100 cm



Standard

3+3 drawers h 15 cm, blue handle
1+1 drawer h 22,5 cm, green handle
1 upper accessory-holder structure
with 2 bars
1 kit of 9 flap-down drawers (5+4)
2 stainless steel shelves with 1 plastic divider
Centralized locking system
Pull-out worktop

Worktop h 100 cm



De serie

3+3 cajones h 15 cm, tirador azul
1+1 cajón h 22,5 cm, tirador verde
1 estructura superior porta accesorios
de 2 barras
1 kit 9 cajones basculantes (5+4)
2 repisas de acero inox con 1 divisorio
de plástico
Cierre centralizado
Superficie extraible

Superficie de trabajo h 100 cm



Art. 3299325_90
Copertura in acciaio inox per piano;
per struttura con cassetti da 45+45 cm
Stainless steel cover for Linkar
trolleys, shaped to match the
top; for trolleys with 45+45 cm
drawers
Cubierta de acero inoxidable para
superficie de trabajo; para estructura
con cajones de 45+45 cm
Couverture en acier inox pour
plan ; pour structure avec tiroirs
de 45+45 cm



Art. 3299225_90
Copertura trasparente realizzata
in polcarbonato per piano; per
struttura con cassetti da 45+45 cm
Transparent cover in polycarbonate
for Linkar trolleys, shaped to match
the top; for trolleys with 45+45 cm
drawers
Cubierta transparente de
polcarbonato para superficie de
trabajo; para estructura con
cajones de 45+45 cm
Couverture transparente fabriquée
en polycarbonate pour plan ; pour
structure avec tiroirs de 45+45 cm



Art. 3299325_90
Copertura in acciaio inox per piano;
per struttura con cassetti da 45+45 cm
Stainless steel cover for Linkar
trolleys, shaped to match the
top; for trolleys with 45+45 cm
drawers
Cubierta de acero inoxidable para
superficie de trabajo; para estructura
con cajones de 45+45 cm
Couverture en acier inox pour
plan ; pour structure avec tiroirs
de 45+45 cm



Art. 3299225_90
Copertura trasparente realizzata
in polcarbonato per piano; per
struttura con cassetti da 45+45 cm
Transparent cover in polycarbonate
for Linkar trolleys, shaped to match
the top; for trolleys with 45+45 cm
drawers
Cubierta transparente de
polcarbonato para superficie de
trabajo; para estructura con
cajones de 45+45 cm
Couverture transparente fabriquée
en polycarbonate pour plan ; pour
structure avec tiroirs de 45+45 cm



De série

3+3 tiroirs h 15 cm, poignée bleue
1+1 tiroir h 22,5 cm, poignée verte
1 structure supérieure porte accessoires
à 2 barres
1 set 9 tiroirs rabattables (5+4)
2 étagères inox avec 1 séparateur
en plastique
Fermeture centralisée
Plan extractible

Plan de travail h 100 cm

Anestesia rianimazione - Anesthesia intensive care
Anestesia reanimación - Anesthésie réanimation

60 cassetto
drawer
cajón
 tiroir

329531

Dim.
cm 89x60x104/163 h
Kg 71



Di serie

- 3 cassetti h 15 cm, maniglia verde
- 1 cassetto h 22,5 cm, maniglia verde
- 1 struttura superiore porta accessori a 2 barre
- 1 doppio gancio portaflebo per struttura superiore
- 1 mensola inox con 1 divisorio in plastica
- 1 mensola grande inox con 3 divisori in plastica
- 1 supporto scatola guanti
- 1 supporto universale
- 1 contenitore giallo per piccoli rifiuti
- Chiusura centralizzata
- Pianetto estraibile

Piano di lavoro h 100 cm



Standard

- 3 drawers h 15 cm, green handle
- 1 drawer h 22,5 cm, green handle
- 1 upper accessory-holder structure with 2 bars
- 1 double hook for I.V. for upper structure
- 1 large stainless steel shelf with 3 plastic dividers
- 1 stainless steel shelf with 1 plastic divider
- 1 support for box of gloves
- 1 universal support
- 1 yellow container for small waste
- Centralized locking system
- Pull-out worktop

Worktop h 100 cm



De serie

- 3 cajones h 15 cm, tirador verde
- 1 cajón h 22,5 cm, tirador verde
- 1 estructura superior porta accesorios de 2 barras
- 1 gancho doble porta suero para estructura superior
- 1 repisa de acero inox con 1 divisorio de plástico
- 1 repisa grandes de acero inox con 3 divisorios de plástico
- 1 soporte caja guantes
- 1 soporte universal
- 1 contenedor amarillo para residuos pequeños
- Cierre centralizado
- Superficie extraíble

Superficie de trabajo h 100 cm



De série

- 3 tiroirs h 15 cm, poignée verte
- 1 tiroir h 22,5 cm, poignée verte
- 1 structure supérieure porte accessoires à 2 barres
- 1 double crochet porte sérum pour structure supérieure
- 1 étagère inox avec 1 séparateur en plastique
- 1 étagère inox avec 3 séparateurs en plastique
- 1 support boîte distribution gants
- 1 support universel
- 1 récipient jaune pour déchets de petites dimensions
- Fermeture centralisée
- Plan extractible

Plan de travail h 100 cm

90 cassetto
drawer
cajón
 tiroir

329533

Dim.
cm 114x60x104/163 h
Kg 89



Di serie

- 3+3 cassetti h 15 cm, maniglia verde
- 1+1 cassetto h 22,5 cm, maniglia verde
- 1 struttura superiore porta accessori a 2 barre
- 1 doppio gancio portaflebo per struttura superiore
- 2 mensole grandi inox con 3 divisori in plastica
- 1 supporto scatola guanti
- 1 supporto universale
- 1 contenitore giallo per piccoli rifiuti
- Chiusura centralizzata
- Pianetto estraibile

Piano di lavoro h 100 cm



Standard

- 3+3 drawers h 15 cm, green handle
- 1+1 drawer h 22,5 cm, green handle
- 1 upper accessory-holder structure with 2 bars
- 1 double hook for I.V. for upper structure
- 2 large stainless steel shelves with 3 plastic dividers
- 1 support for box of gloves
- 1 universal support
- 1 yellow container for small waste
- Centralized locking system
- Pull-out worktop

Worktop h 100 cm



De serie

- 3+3 cajones h 15 cm, tirador verde
- 1+1 cajón h 22,5 cm, tirador verde
- 1 estructura superior porta accesorios de 2 barras
- 1 gancho doble porta suero para estructura superior
- 2 repisas grandes de acero inox con 3 divisorios de plástico
- 1 soporte caja guantes
- 1 soporte universal
- 1 contenedor amarillo para residuos pequeños
- Cierre centralizado
- Superficie extraíble

Superficie de trabajo h 100 cm



De série

- 3+3 tiroirs h 15 cm, poignée verte
- 1+1 tiroir h 22,5 cm, poignée verte
- 1 structure supérieure porte accessoires à 2 barres
- 1 double crochet porte sérum pour structure supérieure
- 2 grandes étagères inox avec 3 séparateurs en plastique
- 1 support boîte distribution gants
- 1 support universel
- 1 récipient jaune pour déchets de petites dimensions
- Fermeture centralisée
- Plan extractible

Plan de travail h 100 cm



Art. 3299175

Aprifiale per barre struttura superiore porta accessori o per barre laterali

Ampoule opener for upper accessory-holder structure bars or for side bars

Abridor de ampollas para barras estructura superior porta accesorios o para barras laterales

Ouvre-ampoules pour barres structure supérieure porte accessoires ou pour barres latérales



DISTRIBUZIONE TERAPIA

MEDICATION DISTRIBUTION

DISTRIBUCIÓN MEDICAMENTOS

DISTRIBUTION MÉDICAMENTS



Il sistema di carrelli Monodose della serie Linkar, permette al personale sanitario la **distribuzione dei farmaci al paziente in modo pratico e sicuro**. Il sistema si avvale di **contenitori monodose per la terapia personalizzata** al singolo paziente che consente i seguenti benefici:

- **MAGGIORE SICUREZZA** sulla terapia del paziente
- **RISPARMIO DI TEMPO** del personale infermieristico e della farmacia
- **OTTIMIZZAZIONE DEL FLUSSO LOGISTICO** dei farmaci e degli scaduti.



The system of Linkar medication distribution trolleys allows hospital staff to **distribute medication to the patient in a practical and safe way**. The system features medication bins for the personalized distribution of medication to the patient with the following advantages:

- **INCREASED SAFETY** in patient medication
- **TIME-SAVING** nursing and pharmacy staff activities
- **OPTIMISED** medication logistics and expiration



El sistema de carros distribución medicamentos de la gamma Linkar, permite al personal la **distribución de medicamentos al paciente de manera práctica y segura**. El sistema se acoge de pastilleros para la terapia personalizada al singolo paciente que lleva los siguientes beneficios:

- **MAYOR SEGURIDAD** en la terapia del paciente
- **AHORRO DE TIEMPO** del personal y de la farmacia
- **OPTIMIZACIÓN DEL FLUJO LOGÍSTICO** de medicamentos y de los vencidos



Les chariots de distribution médicaments journaliers permettent au personnel soignant la **distribution personnalisée, pratique et en sécurité des médicaments aux patients**. Le système utilise de bacs pilulier pour la thérapie personnalisée de chaque patient, qui permet les avantages suivants :

- **Thérapie du patient PLUS SÉCURISÉE**
- **GAIN DE TEMPS** du personnel soignant et de la pharmacie
- **OPTIMISATION DES FLUX LOGISTIQUES** des médicaments valides et expirés.

LINQAR

Carrelli configurati - Preconfigured carros Pre-configurados - Chariots preconfigures



N° 24

10 cm



329553

Dim. cm 74x60x104h

Carrello a 6 vassoi con 4 contenitori monodose cad'uno e 1 cassetto h 22,5 cm, maniglia blu.

Trolley equipped with 6 total extraction trays each one with 4 medication bins, 1 drawer 22,5h with blue colour handle.

Carro de n.6 bandejas con n.4 pastilleros cada uno y n.1 cajón h. 22,5 cm, tirador azul.

Chariot avec 6 plateaux et 4 bacs pilulier et 1 tiroir h22,5, poignée en couleur bleu.

etichette comprese:
labels included:
etiquetas incluidas:
étiquettes incluses :
1 x 3299965



N° 30

10 cm



329556

Dim. cm 89x60x104h

Carrello a 6 vassoi con 5 contenitori monodose cad'uno e 1 cassetto h 22,5 cm, maniglia blu.

Trolley equipped with 6 total extraction trays each one with 5 medication bins, 1 drawer 22,5h with blue colour handle.

Carro de n.6 bandejas con n.5 pastilleros cada uno y n.1 cajón h. 22,5 cm, tirador azul.

Chariot avec 6 plateaux et 5 bacs pilulier et 1 tiroir h22,5, poignée en couleur bleu.

etichette comprese:
labels included:
etiquetas incluidas:
étiquettes incluses :
1 x 3299965

45 x 2



N° 48

10 cm



329559

Dim. cm 114x60x104h

Carrello a 12 vassoi con 4 contenitori monodose cad'uno e 2 cassetti h 22,5 cm, maniglia blu.

Trolley equipped with 12 total extraction trays each one with 4 medication bins, 2 drawers 22,5h with blue colour handles.

Carro de n.12 bandejas con n.4 pastilleros cada uno y n.2 cajón h. 22,5 cm, tirador azul.

Chariot avec 12 plateaux et 4 bacs pilulier et 2 tiroirs h22,5, poignée en couleur bleu.

etichette comprese:
labels included:
etiquetas incluidas:
étiquettes incluses :
2 x 3299965



I vassoi e i contenitori sono facilmente asportabili dalle guide del carrello per agevolare il lavoro del personale infermieristico.

I contenitori monodose sono predisposti per essere agganciati sulle barre normalizzate.



Las bandejas y los contenedores son fácilmente removible de las guías del carro para facilitar el trabajo del personal. Los cajones distribución medicamentos son pensados para ser enganchados a barras normalizadas



The trays and medication bins are easy to remove from the total extraction guides, facilitating the work of hospital staff.

Medication bins are designed to be hooked onto normalized bars.



Les plateaux sont facilement amovibles des glissières du chariot pour faciliter le travail du personnel soignant. Le bac est prédisposé à l'arrière pour l'accrochage aux barres normalisées .



- Impilabilità
- Stackable
- Apilabilidad
- Empilable.

Accessori - Accessories - Accesorios - Accessoires

3299954



3299956



3299955



3299957



3299951

- Vassoio di ricambio asportabile porta contenitori monodose (per cassetto da '45'). Suddiviso in 4 vani permette di ospitare contenitori monodose piccoli (art. 3299954) e grandi (art. 3299956) nelle seguenti configurazioni:
 - 4 contenitori piccoli
 - 2 contenitori piccoli + 1 grande
 - o 2 contenitori grandi
 Dim. cm 45x36.

- Removable spare tray for medication bins (for 45cm range). With 4 compartments, the tray can be equipped with small (art. 3299954) and large (art. 3299956) medication bins, as per the following configurations (either):
 - 4 small bins
 - 2 small bins and 1 large bin
 - or 2 large bins.
 Dim. cm 45x36.

- Bandeja para remplazamiento removable porta contenedores distribución medicamentos (para cajón de 45 cm). Dividido en n.4 huecos permite de poner pastilleros pequeños (art. 3299954) y grandes (art. 3299956) en las siguientes configuraciones:
 - 4 contenedores pequeños
 - 2 contenedores pequeños + 1 grande
 - o 2 grandes
 Dim. cm 45x36.

- Plateau de rechange amovible porte-bacs piluliers (pour tiroir 45cm). Le plateau est prédisposé pour recevoir de bacs piluliers simples (art. 3299954) et doubles (art. 3299956), selon les configurations suivantes:
 - 4 bacs simples
 - 2 bacs simples + 1 bac double
 - ou 2 bacs doubles
 Dim. cm 45x36.



- Contenitori monodose (piccoli e grandi) con 3 divisori interni amovibili e riposizionabili completi di coperchio trasparente scorrevole che garantisce l'integrità del contenuto. Sul retro del contenitore, un gancio consente il posizionamento anche su barre normalizzate porta accessori.

- Medication bins (small and large) with 3 removable and repositionable dividers complete with transparent sliding lid for content preservation. Medication bins feature a hook at the rear to be placed onto normalized accessory-holder bars.

- Pastilleros (pequeños y grandes) con n.3 divisorios internos amovibles y reposicionables completos de cobertura deslizante y transparente que garantiza la integridad del contenido. Atrás el pastillero tiene un gancho universal para barras normalizadas porta accesorios.

- Bacs piluliers (simple et double) avec étiquettes et 3 séparateurs faciles à repositionner, couvercle matière plastique transparente qui garantit l'intégrité du contenu. Le bac est prédisposé à l'arrière pour l'accrochage aux barres normalisées porte - accessoires.

- Divisorio aggiuntivo.

- Additional divider.

- Divisorios adicional.

- Séparateur supplémentaire.

3299965

- Kit 35 serie di etichette per contenitore monodose piccolo 3299954. Comprende 35 etichette frontali + 140 etichette per divisori.

- Kit of 35 label sets for small medication bins code 3299954. That is: 35 front labels + 140 divider labels.

- Kit de 35 series de etiquetas para pastilleros pequeños código 3299954. Incluye 35 etiquetas para frontales + 140 etiquetas para divisorios.

- Jeu de 35 étiquettes pour bac pilulier simple réf. 3299954 : le jeu inclut 35 étiquettes frontales + 140 étiquettes de séparation.

3299970

- Kit 15 serie di etichette per contenitore monodose grande 3299956. Comprende 15 etichette frontali + 60 etichette per divisori.

- Kit of 15 label sets for large medication bins code 3299956. That is: 15 front labels + 60 divider labels.

- Kit de 15 series de etiquetas para pastilleros grandes código 3299956. Incluye 15 etiquetas para frontales + 60 etiquetas para divisorio.

- Jeu de 15 étiquettes pour bac pilulier double réf. 3299956 : le jeu inclut 15 étiquettes frontales + 60 étiquettes de séparation.

3299953

- Vassoio di ricambio asportabile porta contenitori monodose (per cassetto da '60'). Suddiviso in n.5 vani permette di ospitare contenitori monodose piccoli (art. 3299954) e grandi (art. 3299956) nelle seguenti configurazioni:
 - 5 contenitori piccoli
 - 3 contenitori piccoli + 1 grande
 - 1 contenitore piccolo + 2 grandi
 Dim. cm 60x36.

- Removable spare tray for medication bins (for 60cm range). With 5 compartments, the tray can be equipped with small (art. 3299954) and large (art. 3299956) medication bins, as per the following configurations (either):
 - 5 small bins,
 - 3 small bins and 1 large bin
 - 1 small bin and 2 large bins
 Dim. cm 60x36.

- Bandeja para remplazamiento removable porta contenedores distribución terapia (para cajón de 60 cm). Dividido en n.5 huecos permite de poner pastilleros pequeños (art. 3299954) y grandes (art. 3299956) en las siguientes configuraciones:
 - 5 pastilleros pequeños
 - 3 pastilleros pequeños + 1 grande
 - 1 pastilleros pequeños + 2 grandes
 Dim. cm 60x36.

- Plateau porte-bacs piluliers (pour tiroir 60 cm). Le plateau est prédisposé pour recevoir de bacs piluliers simples (art. 3299954) et doubles (art. 3299956), selon les configurations suivantes:
 - 5 bacs piluliers simples (art. 3299954)
 - 3 bacs piluliers simples (art. 3299954) e 1 bac pilulier double (art. 32999 56)
 - 1 bac pilulier simple (art.3299954) + 2 bacs piluliers doubles (art. 3299956)
 Dim. cm 60x36.



Distribuzione farmaci - Medicine distribution
Distribución medicamentos - Distribution de médicaments

45 cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329541

Dim. cm
74x60x104/171 h
Kg 61



Di serie

- 6 cassetti h 7,5 cm, maniglie 2 rosse, 2 blu, 2 verdi
- 1 cassetto h 22,5 cm, maniglia gialla
- 1 struttura superiore porta accessori a 2 barre
- 1 kit 9 cassetti a ribalta (5+4)
- Chiusura centralizzata
- Pianetto estraibile

Piano di lavoro h 100 cm



Standard

- 6 drawers h 7,5 cm, 2 red, 2 blue, 2 green handles
- 1 drawer h 22,5 cm, yellow handle
- 1 upper accessory-holder structure with 2 bars
- 1 kit of 9 flap-down drawers (5+4)
- Centralized locking system
- Pull-out worktop

Worktop h 100 cm



De serie

- 6 cajones h 7,5 cm, tiradores 2 rojos, 2 azules, 2 verdes
- 1 cajón h 22,5 cm, tirador amarillo
- 1 estructura superior porta accesorios de 2 barras
- 1 kit 9 cajones basculantes (5+4)
- Cierre centralizado
- Superficie extraíble

Superficie de trabajo h 100 cm



De série

- 6 tiroirs h 7,5 cm, poignées 2 rouges, 2 bleues, 2 vertes
- 1 tiroir h 22,5 cm, poignée jaune
- 1 structure supérieure porte accessoires à 2 barres
- 1 set 9 tiroirs rabattables (5+4)
- Fermeture centralisée
- Plan extractible

Plan de travail h 100 cm



329541-C

Dim. cm
62x60x104/171 h
Kg 61

60 cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329544

Dim. cm
89x60x104/171 h
Kg 70



Di serie

- 6 cassetti h 7,5 cm, maniglie 2 rosse, 2 blu, 2 verdi
- 1 cassetto h 22,5 mm, maniglia gialla
- 1 struttura superiore porta accessori a 2 barre
- 1 kit 9 cassetti a ribalta (5+4)
- Chiusura centralizzata
- Pianetto estraibile

Piano di lavoro h 100 cm



Standard

- 6 drawers h 7,5 cm, 2 red, 2 blue, 2 green handles
- 1 drawer h 22,5 mm, yellow handle
- 1 upper accessory-holder structure with 2 bars
- 1 kit of 9 flap-down drawers (5+4)
- Centralized locking system
- Pull-out worktop

Worktop h 100 cm.



De serie

- 6 cajones h 7,5 cm, tiradores 2 rojos, 2 azules, 2 verdes
- 1 cajón h 22,5 mm, tirador amarillo
- 1 estructura superior porta accesorios de 2 barras
- 1 kit 9 cajones basculantes (5+4)
- Cierre centralizado
- Superficie extraíble

Superficie de trabajo h 100 cm



De série

- 6 tiroirs h 7,5 cm, poignées 2 rouges, 2 bleues, 2 vertes
- 1 tiroir h 22,5 cm, poignée jaune
- 1 structure supérieure porte accessoires à 2 barres
- 1 set 9 tiroirs rabattables (5+4)
- Fermeture centralisée
- Plan extractible

Plan de travail h 100 cm



329544-C

Dim. cm
78x60x104/171 h
Kg 70

Distribuzione farmaci - Medicine distribution
Distribución medicamentos - Distribution de médicaments

Accessori - Accessories - Accesorios - Accessoires




Art. 3299325_90

Copertura in acciaio inox per piano; per struttura con cassetti da 45+45 cm

Stainless steel cover for Linkar trolleys, shaped to match the top; for trolleys with 45+45 cm drawers

Cobierta de acero inoxidable para superficie de trabajo; para estructura con cajones de 45+45 cm

Couverture en acier inox pour plan ; pour structure avec tiroirs de 45+45 cm

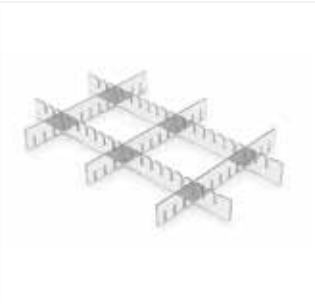

Art. 3299915_45

Kit divisori per cassetto con larghezza 45 cm ed h 7,5 cm

Divider kit for drawer with width 45 cm and h 7.5 cm

Kit divisorios para cajón 45 cm de ancho y altura 7,5 cm

Set de diviseurs de tiroirs largeur 45 cm et h 7,5 cm



Art. 3299270

Cestino portarifiuti, capacità 20 litri per barre laterali con apertura a ginocchio

Waste bin with knee opening system, 20 lt capacity, for side bars

Cubo basura, capacidad 20 litros para barras laterales con abertura con la rodilla

Corbeille à déchets, capacité 20 litres pour barres latérales avec ouverture articulée



Art. 3299200

Portabottiglie

Bottle support

Porta botellas

Porte bouteilles

Pediatria - Pediatrics - Pediatría - Pédiatrie

45
cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329561
Dim. cm 74x60x104/171 h
Kg 61


Di serie
Carrello con decoro sul fianco destro e posteriore, dotato di:
3 cassetti h 15 cm, maniglia 1 rossa, 1 blu, 1 verde
1 cassetto h 22,5 cm, maniglia gialla
1 struttura superiore porta accessori a 2 barre
1 kit 9 cassetti a ribalta (5+4)
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

Piano di lavoro h 100 cm


Standard
Trolley with decorated rear and right side, equipped with:
3 drawers h 15 cm, 1 red handle, 1 blue handle, 1 green handle
1 drawer h 22,5 cm, yellow handle
1 upper accessory-holder structure with 2 bars
1 kit of 9 flap-down drawers (5+4)
Centralized locking system
Pull-out worktop

Worktop h 100 cm


De serie
Carro con decoración en el costado derecho y posterior, dotado de:
3 cajones h 15 cm, tiradores 1 rojo, 1 azul, 1 verde
1 cajón h 22,5 cm, tirador amarillo
1 estructura superior porta accesorios de 2 barras
1 kit 9 cajones basculantes (5+4)
Cierre centralizado
Superficie extraíble

Superficie de trabajo h 100 cm


De série
Chariot avec décoration sur le côté droit et à l'arrière, équipé de :
3 tiroirs h 15 cm, poignée 1 rouge, 1 bleue, 1 verte
1 tiroir h 22,5 cm, poignée jaune
1 structure supérieure porte accessoires à 2 barres
1 set 9 tiroirs rabattables (5+4)
Fermeture centralisée
Plan extractible

Plan de travail h 100 cm

45
cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329562
Dim. 74x60x104 h
Kg 56


Di serie
Carrello con decoro sul fianco destro e posteriore, dotato di:
3 cassetti h 15 cm, maniglia 1 rossa, 1 blu, 1 verde
1 cassetto h 22,5 cm, maniglia gialla
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

Piano di lavoro h 100 cm


Standard
Trolley with decorated rear and right side, equipped with:
3 drawers h 15 cm, 1 red handle, 1 blue handle, 1 green handle
1 drawer h 22,5 cm, yellow handle
Centralized locking system
Pull-out worktop

Worktop h 100 cm


De serie
Carro con decoración en el costado derecho y posterior, dotado de:
3 cajones h 15 cm, tiradores 1 rojo, 1 azul, 1 verde
1 cajón h 22,5 cm, tirador amarillo
Cierre centralizado
Superficie extraíble

Superficie de trabajo h 100 cm


De série
Chariot avec décoration sur le côté droit et à l'arrière, équipé de :
3 tiroirs h 15 cm, poignée 1 rouge, 1 bleue, 1 verte
1 tiroir h 22,5 cm, poignée jaune
Fermeture centralisée
Plan extractible

Plan de travail h 100 cm



329562-C
Dim. 62x60x104 h
Kg 56



Pediatria - Pediatrics - Pediatría - Pédiatrie

60
cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329563
Dim. cm 89x60x104/171 h
Kg 70


Di serie
Carrello con decoro sul fianco destro e posteriore, dotato di:
3 cassetti h 15 cm, maniglia 1 rossa, 1 blu, 1 verde
1 cassetto h 22,5 cm, maniglia gialla
1 struttura superiore porta accessori a 2 barre
1 kit 9 cassetti a ribalta (5+4)
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

Piano di lavoro h 100 cm


Standard
Trolley with decorated rear and right side, equipped with:
3 drawers h 15 cm, 1 red handle, 1 blue handle, 1 green handle
1 drawer h 22,5 cm, yellow handle
1 upper accessory-holder structure with 2 bars
1 kit of 9 flap-down drawers (5+4)
Centralized locking system
Pull-out worktop

Worktop h 100 cm


De serie
Carro con decoración en el costado derecho y posterior, dotado de:
3 cajones h 15 cm, tiradores 1 rojo, 1 azul, 1 verde
1 cajón h 22,5 cm, tirador amarillo
1 estructura superior porta accesorios de 2 barras
1 kit 9 cajones basculantes (5+4)
Cierre centralizado
Superficie extraíble

Superficie de trabajo h 100 cm




De série
Chariot avec décoration sur le côté droit et à l'arrière, équipé de :
3 tiroirs h 15 cm, poignée 1 rouge, 1 bleue, 1 verte
1 tiroir h 22,5 cm, poignée jaune
1 structure supérieure porte accessoires à 2 barres
1 set 9 tiroirs rabattables (5+4)
Fermeture centralisée
Plan extractible

Plan de travail h 100 cm

60
cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329564
Dim. cm 89x60x104 h
Kg 64


Di serie
Carrello con decoro sul fianco destro e posteriore, dotato di:
3 cassetti h 15 cm, maniglia 1 rossa, 1 blu, 1 verde
1 cassetto h 22,5 cm, maniglia gialla
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

Piano di lavoro h 100 cm


Standard
Trolley with decorated rear and right side, equipped with:
3 drawers h 15 cm, 1 red handle, 1 blue handle, 1 green handle
1 drawer h 22,5 cm, yellow handle
Centralized locking system
Pull-out worktop

Worktop h 100 cm



329564-C
Dim. cm 78x60x104 h
Kg 64


De serie
Carro con decoración en el costado derecho y posterior, dotado de:
3 cajones h 15 cm, tiradores 1 rojo, 1 azul, 1 verde
1 cajón h 22,5 cm, tirador amarillo
Cierre centralizado
Superficie extraíble

Superficie de trabajo h 100 cm




De série
Chariot avec décoration sur le côté droit et à l'arrière, équipé de :
3 tiroirs h 15 cm, poignée 1 rouge, 1 bleue, 1 verte
1 tiroir h 22,5 cm, poignée jaune
Fermeture centralisée
Plan extractible

Plan de travail h 100 cm

Fasciatoio - Baby-Changing
Cambiador - Table À Langer

90cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329592

Dim. cm 114x60x106 h
Kg 84



Di serie

1 materassino fasciatoio, blu,
Omologato in Classe 1IM
3 cassetti h 15 cm (lato sx), maniglia blu
1 cassetto h 22,5 cm (lato sx),
maniglia verde
1 cassetto h 15 cm (lato dx), maniglia blu
1 antina con larghezza 45 cm
ed altezza 53 cm (lato dx), maniglia blu
1 ripiano, in acciaio verniciato,
per vano interno (lato dx)
Cassetti con chiusura centralizzata ed
antina con serratura
Pianetto estraibile

Piano di lavoro h 106 cm



Standard1 baby-changing mattress, blue,

1IM Class homologation
3 drawers h 15 cm (left side), blue handle
1 drawer h 22,5 cm (left side), green handle
1 drawer h 15 cm (right side), blue handle
1 door with width 45 cm and h 53 cm
(right side), blue handle
1 painted steel shelf for internal
compartment (right side)
Centralized locking system for drawers
and lock for door
Pull-out worktop

Worktop h 106 cm



De serie

1 colchón cambiador, azul
Homologado en Clase 1 IM
3 cajones h 15 cm n(lado izq.), tirador azul
1 cajón h 22,5 cm (lado izq.), tirador verde
1 cajón h 15 cm (lado dch.), tirador azul
1 puerta de 45 cm de ancho y 53 cm
de altura (lado dch.), tirador azul
1 repisa de acero pintado para
compartimento interno (lado dch.)
Cajones con cierre centralizado y puerta
con cerradura
Superficie extraible

Superficie de trabajo h 106 cm



De série

1 matelas table à langer, bleu,
Homologué en Classe 1IM
3 tiroirs h 15 cm (côté g.), poignée bleue
1 tiroir h 22,5 cm (côté g.), poignée verte
1 tiroir h 15 cm (côté d.), poignée bleue
1 porte largeur 45 cm et hauteur 53 cm
(côté d.), poignée bleue 1 étagère,
en acier peint. pour compartiment interne
(côté d.)
Tiroirs avec fermeture centralisée et
porte avec serrure
Plan extractible

Plan de travail h 106 cm



329593

Dim. cm 114x60x106 h
Kg 83



Di serie

1 materassino fasciatoio, blu,
Omologato in Classe 1IM
3 cassetti h 15 cm (lato sx), maniglia blu
1 cassetto h 22,5 cm (lato sx),
maniglia verde
1 cassetto h 15 cm (lato dx), maniglia blu
1 ripiano, in acciaio verniciato,
per vano a giorno (lato dx)
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

Piano di lavoro h 106 cm



Standard

1 baby-changing mattress, blue,
1IM Class homologation
3 drawers h 15 cm (left side), blue handle
1 drawer h 22,5 cm (left side), green handle
1 drawer h 15 cm (right side), blue handle
1 painted steel shelf for open
compartment (right side)
Centralized locking system
Pull-out worktop

Worktop h 106 cm



De serie

1 colchón cambiador, azul
Homologado en Clase 1 IM
3 cajones h 15 cm (lado izq.), tirador azul
1 cajón h 22,5 cm (lado izq.), tirador verde
1 cajón h 15 cm (lado dch.), tirador azul
1 repisa de acero pintado para
compartimento abierto (lado dch.)
Cierre centralizado
Superficie extraible

Superficie de trabajo h 106 cm



De série

1 matelas table à langer, bleu,
Homologué en Classe 1IM
3 tiroirs h 15 cm (côté g.), poignée bleue
1 tiroir h 22,5 cm (côté g.), poignée verte
1 tiroir h 15 cm (côté d.), poignée bleue
1 étagère, en acier peint. pour niche
ouverte (côté d.)
Fermeture centralisée
Plan extractible

Plan de travail h 106 cm



Suture - Sutures
Suturas - Sutures

45cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329571

Dim.
cm 74x60x104/179 h
Kg 63



Di serie

2 cassetti h 7,5 cm, maniglia blu
2 cassetti h 15 cm, maniglia blu
1 cassetto h 22,5 cm, maniglia gialla
1 struttura superiore porta accessori
a 2 barre
1 struttura alveolare 40 celle
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

Piano di lavoro h 100 cm



Standard

2 drawers h 7,5 cm, blue handle
2 drawers h 15 cm, blue handle
1 drawer h 22,5 cm, yellow handle
1 upper accessory-holder structure
with 2 bars
1 hanging element of 40 cells
Centralized locking system
Pull-out worktop

Worktop h 100 cm

60cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329572

Dim.
cm 89x60x104/179 h
Kg 72



De serie

2 cajones h 7,5 cm, tirador azul
2 cajones h 15 cm, tirador azul
1 cajón h 22,5 cm, tirador amarillo
1 estructura superior porta accesorios
de 2 barras
1 estructura alveolar de 40 celdas
Cierre centralizado
Superficie extraible


Superficie de trabajo h 100 cm



De série

2 tiroirs h 7,5 cm, poignée bleue
2 tiroirs h 15 cm, poignée bleue
1 tiroir h 22,5 cm, poignée jaune
1 structure supérieure porte accessoires
à 2 barres
1 structure alvéolaire 40 cellules
Fermeture centralisée
Plan extractible

Plan de travail h 100 cm

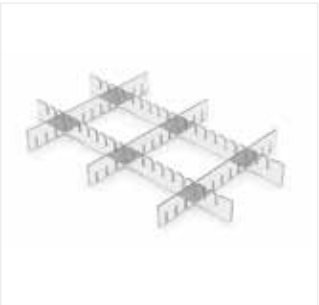


Art. 3299915_45

Kit divisori per cassetto
con larghezza 45 cm ed h 7,5 cm
Divider kit for drawer with width
45 cm and h 7.5 cm

Kit divisorios para cajón 45 cm de
ancho y 7,5 cm de altura

Set de diviseurs de tiroirs largeur
45 cm et h 7,5 cm

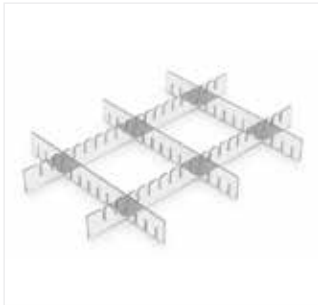

Art. 3299915_60

Kit divisori per cassetto
con larghezza 60 cm ed h 7,5 cm
Divider kit for drawer with width 60 cm
and h 7.5 cm

Kit divisorios para cajón 60 cm de
ancho y 7,5 cm de altura

Set de diviseurs de tiroirs largeur
60 cm et h 7,5 cm



Art. 3299225_45

Copertura trasparente realizzata
in policarbonato per piano; per
struttura con cassetti da 45 cm

Transparent cover in polycarbonate
for Linkar trolleys, shaped to match
the top; for trolleys with 45 cm
drawers

Cubierta transparente de
policarbonato para superficie de
trabajo; para estructura con
cajones de 45 cm

Couverture transparente fabriquée
en polycarbonate pour plan ; pour
structure avec tiroirs de 45 cm



Art. 3299225_60

Copertura trasparente realizzata
in policarbonato per piano; per
struttura con cassetti da 60 cm

Transparent cover in polycarbonate
for Linkar trolleys, shaped to match
the top; for trolleys with 60 cm
drawers

Cubierta transparente de
policarbonato para superficie de
trabajo; para estructura con
cajones de 60 cm

Couverture transparente fabriquée
en polycarbonate pour plan ; pour
structure avec tiroirs de 60 cm



Sala Gessi - Plasters Room
Sala Yesos - Salle De Plâtrage

60 cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329576

Dim. cm 89x60x104 h
Kg 66



Di serie

3 cassetti h 15 cm, maniglia verde
1 cassetto h 22,5 cm, maniglia blu
1 copertura in acciaio inox per piano
1 pianetto abbattibile laterale sul fianco destro (dim. cm 46x43)
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

Piano di lavoro h 100 cm

Sul fianco destro non sono previste le 2 barre porta accessori, art.3299110, in quanto non compatibili con il pianetto abbattibile



Standard

3 drawers h 15 cm, green handle
1 drawer h 22,5 cm, blue handle
1 stainless steel worktop cover
1 flap-down board on right side (dim. cm 46x43)
Centralized locking system
Pull-out worktop

Worktop h 100 cm

The 2 accessory-holder bars, art.3299110, are not fitted on the right side as they are not compatible with the flap-down board



De serie

3 cajones h 15 cm, tirador verde
1 cajón h 22,5 cm, tirador azul
1 cubierta de acero inoxidable por nivel
1 superficie de trabajo abatible lateral en el costado derecho (dim. 46x43 cm)
Cierre centralizado
Superficie extraíble

Superficie de trabajo h 100 cm

En el costado derecho no se prevén las 2 barras porta accesorios, art.3299110 ya que no son compatibles con el superficie de trabajo abatible



De série

3 tiroirs h 15 cm, poignée verte
1 tiroir h 22,5 cm, poignée bleue
1 couverture en acier inox pour plan
1 étagère latérale rabattable sur le côté droit (dim. cm 46x43)
Fermeture centralisée
Plan extractible

Plan de travail h 100 cm

Sur le côté droit ne sont pas prévues les 2 barres porte accessoires, art.3299110, car pas compatibles avec l'étagère rabattable



Art. 3299325_60

Copertura in acciaio inox per piano;
per struttura con cassetti da 60 cm
Stainless steel cover for Linkar trolleys, shaped to match the top;
for trolleys with 60 cm drawers
Cubierta de acero inoxidable para superficie de trabajo;
para estructura con cajones de 60 cm
Couverture en acier inox pour plan;
pour structure avec tiroirs de 60 cm

90 cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329577

Dim. cm 114x60x104 h
Kg 84



Di serie

3+3 cassetti h 15 cm, maniglia verde
1+1 cassetto h 22,5 mm, maniglia blu
1 copertura in acciaio inox per piano
1 pianetto abbattibile laterale sul fianco destro (dim. cm 46x43)
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

Piano di lavoro h 100 cm

Sul fianco destro non sono previste le 2 barre porta accessori, art.3299110, in quanto non compatibili con il pianetto abbattibile



Standard

3+3 drawers h 15 cm, green handle
1+1 drawer h 22,5 cm, blue handle
1 stainless steel worktop cover
1 flap-down board on right side (dim. cm 46x43)
Centralized locking system
Pull-out worktop

Worktop h 100 cm

The 2 accessory-holder bars, art.3299110, are not fitted on the right side as they are not compatible with the flap-down board



De serie

3+3 cajones h 15 cm, tirador verde
1+1 cajón h 22,5 mm, tirador azul
1 cubierta de acero inoxidable por nivel
1 superficie de trabajo abatible lateral al costado derecho (dim. 46x43 cm)
Cierre centralizado
Superficie extraíble

Superficie de trabajo h 100 cm

En el costado derecho no se prevén las 2 barras porta accesorios, art.3299110 ya que no son compatibles con el superficie de trabajo abatible



De série

3+3 tiroirs h 15 cm, poignée verte
1+1 tiroir h 22,5 cm, poignée bleue
1 couverture en acier inox pour plan
1 étagère latérale rabattable sur le côté droit (dim. cm 46x43)
Fermeture centralisée
Plan extractible

Plan de travail h 100 cm

Sur le côté droit ne sont pas prévues les 2 barres porte accessoires, art.3299110, car pas compatibles avec l'étagère rabattable



Art. 3299325_90

Copertura in acciaio inox per piano;
per struttura con cassetti da 90 cm
Stainless steel cover for Linkar trolleys, shaped to match the top;
for trolleys with 90 cm drawers
Cubierta de acero inoxidable para superficie de trabajo;
para estructura con cajones de 90 cm
Couverture en acier inox pour plan;
pour structure avec tiroirs de 90 cm



Utility - Utility
Utility - Utilités

90 cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329603

Dim. cm 114x60x104 h
Kg 83



Di serie

3+3 cassetti h 15 cm, maniglia 3 blu,
3 verdi
1+1 cassetto h 22,5 cm,
maniglia 1blu, 1 verde
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

Piano di lavoro h 100 cm



Standard

3+3 drawers h 15 cm, 3 blue, 3 green
handles
1+1 drawer h 22,5 cm, 1 blue,
1 green handle
Centralized locking system
Pull-out worktop

Worktop h 100 cm



De serie

3+3 cajones h 15 cm, tirador 3 azul,
3 verdes
1+1 cajón h 22,5 cm, tirador 1 azul,
1 verde
Cierre centralizado
Superficie extraíble

Superficie de trabajo h 100 cm



De série

3+3 tiroirs h 15 cm, poignée 3 bleues,
3 vertes
1+1 tiroir h 22,5 cm,
poignée 1 bleue, 1 verte
Fermeture centralisée
Plan extractible

Plan de travail h 100 cm

45 cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329601

Dim. cm 74x60x104 h
Kg 57



Di serie

3 cassetti h 15 cm, maniglia blu
1 cassetto h 22,5 cm, maniglia blu
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

Piano di lavoro h 100 cm



Standard

3 drawers h 15 cm, blue handle
1 drawer h 22,5 cm, blue handle
Centralized locking system
Pull-out worktop

Worktop h 100 cm



De serie

3 cajones h 15 cm, tirador azul
1 cajón h 22,5 cm, tirador azul
Cierre centralizado
Superficie extraíble

Superficie de trabajo h 100 cm



De série

3 tiroirs h 15 cm, poignée bleue
1 tiroir h 22,5 cm, poignée bleue
Fermeture centralisée
Plan extractible

Plan de travail h 100 cm

60 cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329602

Dim. cm 89x60x104 h
Kg 64

Utility - Utility
Utility - Utilités

45 cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329604

Dim. cm 74x60x104 h
Kg 57



Di serie

2 cassetti h 7,5 cm, maniglia blu
2 cassetti h 15 cm, maniglia blu
1 cassetto h 22,5 cm, maniglia blu
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

Piano di lavoro h 100 cm



Standard

2 drawers h 7,5 cm, blue handle
2 drawers h 15 cm, blue handle
1 drawer h 22,5 cm, blue handle
Centralized locking system
Pull-out worktop

Worktop h 100 cm

60 cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329605

Dim. cm 89x60x104 h
Kg 64



De serie

2 cajones h 7,5 cm, tirador azul
2 cajones h 15 cm, tirador azul
1 cajón h 22,5 cm, tirador azul
Cierre centralizado
Superficie extraíble

Superficie de trabajo h 100 cm



De série

2 tiroirs h 7,5 cm, poignée bleue
2 tiroirs h 15 cm, poignée bleue
1 tiroir h 22,5 cm, poignée bleue
Fermeture centralisée
Plan extractible

Plan de travail h 100 cm

45 cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329607

Dim. cm 74x60x104 h
Kg 56



Di serie

1 vano a giorno superiore h 15 cm
2 cassetti h 15 cm, maniglia blu
1 cassetto h 22,5 cm, maniglia blu
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

Piano di lavoro h 100 cm



Standard

1 upper open compartment, h 15 cm
2 drawers h 15 cm, blue handle
1 drawer h 22,5 cm, blue handle
Centralized locking system
Pull-out worktop

Worktop h 100 cm

60 cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329608

Dim. cm 89x60x104 h
Kg 63



De serie

1 compartimento abierto superior h 15 cm
2 cajones h 15 cm, tirador azul
1 cajón h 22,5 cm, tirador azul
Cierre centralizado
Superficie extraíble

Superficie de trabajo h 100 cm



De série

1 niche ouverte supérieure h 15 cm
2 tiroirs h 15 cm, poignée bleue
1 tiroir h 22,5 cm, poignée bleue
Fermeture centralisée
Plan extractible

Plan de travail h 100 cm

Utility - Utility
Utility - Utilités

45 cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329609

Dim. cm 74x60x104 h
Kg 55



Di serie

1 vano a giorno superiore h 30 cm
1 cassetto h 15 cm, maniglia blu
1 cassetto h 22,5 cm, maniglia blu
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

Piano di lavoro h 100 cm



Standard

1 upper open compartment, h 30 cm
1 drawer h 15 cm, blue handle
1 drawer h 22,5 cm, blue handle
Centralized locking system
Pull-out worktop

Worktop h 100 cm

60 cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329610

Dim. cm 89x60x104 h
Kg 62



De serie

1 compartimento abierto superior h 30 cm
1 cajón h 15 cm, tirador azul
1 cajón h 22,5 cm, tirador azul
Cierre centralizado
Superficie extraíble

Superficie de trabajo h 100 cm



De série

1 niche ouverte supérieure h 30 cm
1 tiroir h 15 cm, poignée bleue
1 tiroir h 22,5 cm, poignée bleue
Fermeture centralisée
Plan extractible

Plan de travail h 100 cm

90 cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329606

Dim. cm 114x60x104 h
Kg 83



Di serie

2+2 cassetti h 7,5 cm, maniglia 2 blu,
2 verdi
2+2 cassetti h 15 cm, maniglia 2 blu,
2 verdi
1+1 cassetto h 22,5 cm, maniglia 2 blu,
2 verdi
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

Piano di lavoro h 100 cm



Standard

2+2 drawers h 7,5 cm, 2 blue, 2 green
handles
2+2 drawers h 15 cm, 2 blue, 2 green
handles
1+1 drawers h 22,5 cm, 1 blue,
1 green handle
Centralized locking system
Pull-out worktop

Worktop h 100 cm



De serie

2+2 cajones h 7,5 cm, tirador 2 azul,
2 verdes
2+2 cajones h 15 cm, tirador 2 azul,
2 verdes
1+1 cajones h 22,5 cm, tirador 2 azul,
2 verdes
Cierre centralizado
Superficie extraíble

Superficie de trabajo h 100 cm



De série

2+2 tiroirs h 7,5 cm, poignée 2 bleues,
2 vertes
2+2 tiroirs h 15 cm, poignée 2 bleues,
2 vertes
1+1 tiroir h 15 cm, poignée 2 bleues,
2 vertes
Fermeture centralisée
Plan extractible

Plan de travail h 100 cm

Utility - Utility
Utility - Utilités

90 cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329613

Dim. cm 114x60x104 h
Kg 82



Di serie

1 cassetto h 7,5 cm, maniglia verde
4 cassetti h 15 cm, maniglia verde
3 cassetti h 22,5 cm, maniglia blu
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

Piano di lavoro h 100 cm



Standard

1 drawer h 7,5 cm, green handle
4 drawers h 15 cm, green handle
3 drawers h 22,5 cm, blue handle
Centralized locking system
Pull-out worktop

Worktop h 100 cm



De serie

1 cajón h 7,5 cm, tirador verde
4 cajones h 15 cm, tirador verde
3 cajones h 22,5 cm, tirador azul
Cierre centralizado
Superficie extraíble

Superficie de trabajo h 100 cm



De série

1 tiroir h 7,5 cm, poignée verte
4 tiroirs h 15 cm, poignée verte
3 tiroirs h 22,5 cm, poignée bleue
Fermeture centralisée
Plan extractible

Plan de travail h 100 cm

Utility - Utility
Utility - Utilités

45 cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329611
Dim. cm 74x60x104 h
Kg 56

 **Di serie**
3 cassetti h 22,5 cm, maniglia blu
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

Piano di lavoro h 100 cm

 **Standard**
3 drawers h 22,5 cm, blue handle
Centralized locking system
Pull-out worktop

Worktop h 100 cm

60 cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329612
Dim. cm 89x60x104 h
Kg 63

 **De serie**
3 cajones h 22,5 cm, tirador azul
Cierre centralizado
Superficie extraíble

Superficie de trabajo h 100 cm

 **De série**
3 tiroirs h 22,5 cm, poignée bleue
Fermeture centralisée
Plan extractible

Plan de travail h 100 cm

45 cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329617
Dim. cm 74x60x104 h
Kg 57

 **Di serie**
1 cassetto h 7,5 cm, maniglia blu
4 cassetti h 15 cm, maniglia blu
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

Piano di lavoro h 100 cm

 **Standard**
1 drawer h 7,5 cm, blue handle
4 drawers h 15 cm, blue handle
Centralized locking system
Pull-out worktop

Worktop h 100 cm

60 cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329618
Dim. cm 89x60x104 h
Kg 64

 **De serie**
1 cajón h 7,5 cm, tirador azul
4 cajones h 15 cm, tirador azul
Cierre centralizado
Superficie extraíble

Superficie de trabajo h 100 cm

 **De série**
1 tiroir h 7,5 cm, poignée bleue
4 tiroirs h 15 cm, poignée bleue
Fermeture centralisée
Plan extractible

Plan de travail h 100 cm

45 cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329614
Dim. cm 74x60x104 h
Kg 57

 **Di serie**
1 cassetto h 7,5 cm, maniglia blu
1 cassetto h 15 cm, maniglia blu
2 cassetti h 22,5 cm, maniglia blu
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

Piano di lavoro h 100 cm

 **Standard**
1 drawer h 7,5 cm, blue handle
1 drawer h 15 cm, blue handle
2 drawers h 22,5 cm, blue handle
Centralized locking system
Pull-out worktop

Worktop h 100 cm

60 cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329615
Dim. cm 89x60x104 h
Kg 64

 **De serie**
1 cajón h 7,5 cm, tirador azul
1 cajón h 15 cm, tirador azul
2 cajones h 22,5 cm, tirador azul
Cierre centralizado
Superficie extraíble

Superficie de trabajo h 100 cm

 **De série**
1 tiroir h 7,5 cm, poignée bleue
1 tiroir h 15 cm, poignée bleue
2 tiroirs h 22,5 cm, poignée bleue
Fermeture centralisée
Plan extractible

Plan de travail h 100 cm

45 cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329619
Dim. cm 74x60x104 h
Kg 58

 **Di serie**
3 cassetti h 7,5 cm, colore maniglia blu
3 cassetti h 15 cm, colore maniglia blu
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

Piano di lavoro h 100 cm

 **Standard**
3 drawers h 7,5 cm, blue handle
3 drawers h 15 cm, blue handle
Centralized locking system
Pull-out worktop

Worktop h 100 cm

60 cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329620
Dim. cm 89x60x104 h
Kg 64

 **De serie**
3 cajones h 7,5 cm, color tirador azul
3 cajones h 15 cm, color tirador azul
Cierre centralizado
Superficie extraíble

Superficie de trabajo h 100 cm

 **De série**
3 tiroirs h 7,5 cm, poignée bleue
3 tiroirs h 15 cm, poignée bleue
Fermeture centralisée
Plan extractible

Plan de travail h 100 cm

Utility - Utility
Utility - Utilités

45 cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329621
Dim. cm 74x60x104 h
Kg 57

 **Di serie**
4 cassetti h 7,5 cm, maniglia blu
1 cassetto h 15 cm, maniglia blu
1 cassetto h 22,5 cm, maniglia blu
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

Piano di lavoro h 100 cm

 **Standard**
4 drawers h 7,5 cm, blue handle
1 drawer h 15 cm, blue handle
1 drawer h 22,5 cm, blue handle
Centralized locking system
Pull-out worktop

Worktop h 100 cm

 **De serie**
4 cajones h 7,5 cm, tirador azul
1 cajón h 15 cm, tirador azul
1 cajón h 22,5 cm, tirador azul
Cierre centralizado
Superficie extraíble

Superficie de trabajo h 100 cm

 **De série**
4 tiroirs h 7,5 cm, poignée bleue
1 tiroir h 15 cm, poignée bleue
1 tiroir h 22,5 cm, poignée bleue
Fermeture centralisée

Plan de travail h 100 cm

45 cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329624
Dim. cm 74x60x104 h
Kg 58

 **Di serie**
5 cassetti h 7,5 cm, maniglia blu
2 cassetti h 15 cm, maniglia blu
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

Piano di lavoro h 100 cm

 **Standard**
5 drawers h 7,5 cm, blue handle
2 drawers h 15 cm, blue handle
Centralized locking system
Pull-out worktop

Worktop h 100 cm

60 cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329625
Dim. cm 89x60x104 h
Kg 65

 **De serie**
5 cajones h 7,5 cm, tirador azul
2 cajones h 15 cm, tirador azul
Cierre centralizado
Superficie extraíble

Superficie de trabajo h 100 cm

 **De série**
5 tiroirs h 7,5 cm, poignée bleue
2 tiroirs h 15 cm, poignée bleue
Fermeture centralisée
Plan extractible

Plan de travail h 100 cm

Stoccaggio - Storage
Almacenamiento - Stockage

45 cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329586
Dim. cm 74x60x104 h
Kg 54

 **Di serie**
2 vani a giorno superiori
1 cassetto h 22,5 cm, maniglia verde
1 ripiano amovibile in lamiera verniciata
1 ripiano fisso in lamiera verniciata
Cassetto con serratura
Pianetto estraibile

Piano di lavoro h 100 cm

 **Standard**
2 upper open compartments
1 drawer h 22,5 cm, green handle
1 painted steel sheet shelf, removable
1 fixed shelf in painted steel sheet
Centralized locking system
Pull-out worktop

Worktop h 100 cm

329586-C
Dim. cm 62x60x104 h
Kg 54

 **De serie**
2 compartimentos abiertos superiores
1 cajón h 22,5 cm, tirador verde
1 repisa extraíble de chapa pintada
1 repisa fija de chapa pintada
Cajón con cerradura
Superficie extraíble

Superficie de trabajo h 100 cm

 **De série**
2 niches ouvertes supérieures
1 tiroir h 22,5 cm, poignée verte
1 étagère amovible en tôle peinte
1 étagère fixe en tôle peinte
Tiroir avec serrure
Plan extractible

Plan de travail h 100 cm

60 cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329587
Dim. cm 89x60x104 h
Kg 62

 **Di serie**
1 vano a giorno superiore h 30 cm
1 cassetto h 15 cm, maniglia verde
1 cassetto h 22,5 cm, maniglia verde
1 ripiano fisso in lamiera verniciata
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

Piano di lavoro h 100 cm

 **Standard**
1 upper open compartment h 30 cm
1 drawer h 15 cm, green handle
1 drawer h 22,5 cm, green handle
1 fixed shelf in painted steel sheet
Centralized locking system
Pull-out worktop

Worktop h 100 cm

329587-C
Dim. cm 78x60x104 h
Kg 62

 **De serie**
1 compartimento abierto superior h 30 cm
1 cajón h 15 cm, tirador verde
1 cajón h 22,5 cm, tirador verde
1 repisa fija de chapa pintada
Cierre centralizado
Superficie extraíble

Superficie de trabajo h 100 cm

 **De série**
1 niche ouverte supérieure h 30 cm
1 tiroir h 15 cm, poignée verte
1 tiroir h 22,5 cm, poignée verte
1 étagère fixe en tôle peinte
Fermeture centralisée
Plan extractible

Plan de travail h 100 cm

Giro visita - Rounds
Ronda de visitas - Visite

60 cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329631
Dim. cm 89x60x104 h
Kg 64

Di serie
1 cassettone porta cartelle e lastre
A3/speciale, maniglia blu
1 cassettone porta cartelle A4,
maniglia verde
1 tasca laterale (fianco sinistro)
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile
Piano di lavoro h 100 cm
Il cassettone porta cartelle e lastre
A3/speciale è accessoriabile
con 20/25 porta cartelle A3 art.3299921
o 20/25 porta cartelle speciali
(dim. cm 46,5x39 h) art.3299922
Il cassettone porta cartelle A4 è
accessoriabile con 20/25 porta cartelle
A4 art.3299920

Standard
1 deep drawer for files and X-ray plates,
A3/special format, blue handle
1 deep drawer for files, A4 format,
green handle
1 side pocket (left side)
Centralized locking system
Pull-out worktop
Worktop h 100 cm
The drawer for files and X-ray plates,
A3/special format, may be fitted with
20/25 A3 folders art.3299921 or 20/25
special format folders (dim. cm 46.5x39 h)
art.3299922
The drawer for A4 files may be fitted
with 20/25 A4 folders art.3299920

De serie
1 cajón porta carpetas y radiografías
A/3 especial, tirador azul
1 cajón porta carpetas A4,
tirador verde
1 bolsillo lateral (costado izquierdo)
Cierre centralizado
Superficie extraíble
Superficie de trabajo h 100 cm
El cajón porta carpetas y radiografías
A3/especial puede dotarse de 20/25
porta carpetas A3 art.3299921 o 20/25
porta carpetas especiales
(dim. cm 46,5x39 h) art.3299922
El cajón porta carpetas A4 puede dotarse
de 20/25 porta carpetas A4 art.3299920

De série
1 meuble à tiroirs porte dossiers et clichés
radios A3/spécial, poignée bleue
1 meuble à tiroirs porte dossiers et clichés
radios poignée verte
1 poche latérale (côté gauche)
Fermeture centralisée
Plan extractible
Plan de travail h 100 cm
Le meuble à tiroirs porte dossiers et clichés
radios A3/spécial peut être équipé
avec 20/25 porte dossiers A3 art.3299921
ou 20/25 porte dossiers spéciaux
(dim. cm 46,5x39 h) art.3299922
Le meuble à tiroirs porte dossiers A4
peut être équipé avec 20/25 porte dossiers
A4 art.3299920

60 cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329632
Dim. cm 89x60x104 h
Kg 64

Di serie
1 cassettone porta cartelle e lastre
A3/speciale, maniglia blu
2 cassetti h 15 cm, maniglia verde
1 tasca laterale (fianco sinistro)
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile
Piano di lavoro h 100 cm
Il cassettone porta cartelle e lastre
A3/speciale è accessoriabile con 20/25
porta cartelle A3 art.3299921 o 20/25
porta cartelle speciali (dim. cm 46,5x39 h)
art.3299922

Standard
1 deep drawer for files and X-ray plates,
A3/special format, blue handle
2 drawers h 15 cm, green handle
1 side pocket (left side)
Centralized locking system
Pull-out worktop
Worktop h 100 cm
The drawer for files and X-ray plates,
A3/special format, may be fitted with
20/25 A3 folders art.3299921 or 20/25
special format folders
(dim. cm 46.5x39 h)
art.3299922

De serie
1 cajón porta carpetas y radiografías
A3/especial, tirador azul 2 cajones
h 15 cm,
tirador verde 1 bolsillo lateral
(costado izquierdo)
Cierre centralizado
Superficie extraíble
Superficie de trabajo h 100 cm
El cajón porta carpetas y radiografías
A3/especial puede dotarse de 20/25
porta carpetas A3 art.3299921 o 20/25
porta carpetas especiales
(dim. cm 46,5x39 h) art.3299922

De série
1 meuble à tiroirs porte dossiers et clichés
radios A3/spécial, poignée bleue
2 tiroirs h 15 cm, poignée verte
1 poche latérale (côté gauche)
Fermeture centralisée
Plan extractible
Plan de travail h 100 cm
Le meuble à tiroirs porte dossiers et clichés
radios A3/spécial peut être équipé avec
20/25 porte dossiers art.3299921 ou 20/25
porte dossiers spéciaux (dim. cm 46,5x39 h)
art.3299922

Giro visita - Rounds
Ronda de visitas - Visite

60 cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329633
Dim. cm 89x60x104 h
Kg 65

Di serie
1 cassetto h 15 cm, maniglia blu
1 modulo interno porta lastre,
a 12 celle
2 antine con larghezza 30 cm
ed altezza 55 cm, maniglia blu
1 tasca laterale (fianco sinistro)
Cassetto con serratura e antine
con serratura
Pianetto estraibile
Piano di lavoro h 100 cm

Standard
1 drawer h 15 cm, blue handle
1 internal module for
holding X-ray plates, with 12 cells
2 doors width 30 cm and h 55 cm,
blue handle
1 side pocket (left side)
Drawer with lock and doors with lock
Pull-out worktop
Worktop h 100 cm

De serie
1 cajón h 15 cm, tirador azul
1 módulo interno porta radiografías,
de 12 celdas 2 puertas de 30 cm
de ancho y 55 cm de altura,
tirador azul 1 bolsillo lateral
(costado izquierdo)
Cajón con cerradura y puertas
con cerradura
Superficie extraíble
Superficie de trabajo h 100 cm

De série
1 tiroir h 15 cm, poignée bleue
1 module interne porte clichés radios,
à 12 cellules
2 portes et 55 cm largeur 30 cm
et hauteur 55 cm, poignée bleue
1 poche latérale (côté gauche)
Tiroir avec serrure et portes avec serrure
Plan extractible
Plan de travail h 100 cm

90 cassetto
drawer
cajón
 tiroir



329634
Dim. cm 114x60x104 h
Kg 84


Di serie
1+1 cassetto h 15 cm, maniglia verde
2 moduli porta lastre a 10 celle
2 antine altezza 55 cm, maniglia blu
Cassetti con serratura e
antine con serratura
Pianetto estraibile
Piano di lavoro h 100 cm

Standard
1+1 drawer h 15 cm, green handle
2 modules for holding X-ray plates,
with 10 cells
2 doors width 45 cm and h 55 cm,
blue handle
Drawer with lock and doors with lock
Pull-out worktop
Worktop h 100 cm

De serie
1+1 cajón h 15 cm, tirador verde
2 módulos porta radiografías
de 10 celdas 2 puertas
de 55 cm de altura,
tirador azul
Cajones con cerradura y puertas
con cerradura
Superficie extraíble
Superficie de trabajo h 100 cm

De série
1+1 tiroir h 15 cm, poignée verte
2 modules porte clichés radios
à 10 cellules
2 portes hauteur 55 cm, poignée bleue
Tiroirs avec serrure et
portes avec serrure
Plan extractible
Plan de travail h 100 cm

Accessori - Accessories - Accesorios - Accessoires

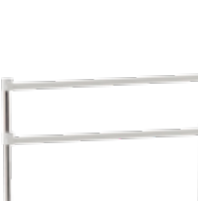
Articolo - Article Artículo - Article		Descrizione  Description 	Descripción  Description 
Art. 3299055		Asta portaflebo, regolabile in altezza, a 4 ganci. Realizzata in tubolare di acciaio inox lucidato. Adjustable-height i.v. rod with 4 hooks. Made of polished tubular stainless steel.	Soporte suero de altura regulable con 4 ganchos. Fabricada con tubos de acero inoxidable pulido. Tige porte-sérum réglable en hauteur, à 4 crochets. Fabriquée en tube d'acier inox poli miroir.
Art. 3299095		Pianetto porta defibrillatore, con lacci. Piano di appoggio in plexiglass, dimensioni cm 40x30. Defibrillator holder tray, with straps. Plexiglass tray, dimensions cm 40x30.	Tablero porta desfibrilador, con cintos. Superficie de apoyo de plexiglás, dimensiones 40x30 cm. Plan porte défibrillateur, avec lacets. Plan d'appui en plexiglas, dimensions 40x30 cm.
Art. 3299100		Supporto porta bombola ossigeno, con lacci. Oxygen cylinder holder, with straps.	Soporte porta bombona de oxígeno con lazos. Support porte obus à oxygène, avec lacets.
Art. 3299105 Art. 3299105-C (Linkar Compact)		Lastra massaggio cardiaco. Cardiac massage board.	Placa masaje cardiaco. Plaque pour massage cardiaque.
Art. 3299115_45 Art. 3299117_45 (Linkar Compact)		Struttura superiore porta accessori, carrelli da 45 cm. Realizzata con montanti in tubolare di acciaio inox lucidato, diametro 25 mm, altezza 60 cm. 2 traversi, quello inferiore regolabile in altezza, in barra di alluminio, 25x10 mm, verniciati grigio, per aggancio accessori. Morsetti in materiale plastico colore grigio. Lunghezza utile per aggancio accessori 55 cm. Larghezza carrello 74 cm (senza accessori). Upper accessory-holder structure for Linkar trolleys, 45 cm. Structure made of polished stainless steel tubular posts, diameter 25 mm, height 60 cm. 2 accessory holder aluminium cross bars, of which 1 fixed at the top and 1 height adjustable, 25x10 mm, painted grey. Grey plastic clamps. Working length for hanging accessories 55 cm. Trolley width 74 cm (without accessories).	Estructura superior porta accesorios, carros de 45 cm. Fabricada con montantes de tubos de acero inoxidable pulido, de 25 mm de diámetro, 60 cm de altura, con tapones superiores de cierre. 2 traveseros de tubo de aluminio de 25x10 mm, pintados de gris para enganche de accesorios. Reguladores para la regulación en altura de las barras porta accesorios, de material plástico de color gris. Longitud útil para enganche de accesorios 55 cm. Ancho carro 74 cm (sin accesorios). Structure supérieure porte accessoires, chariots de 45 cm. Fabriquée avec montants en tube d'acier inox poli miroir, diamètre 25 mm, hauteur 60 cm, équipés de bouchons de fermeture dans la partie supérieure. 2 traverses fabriquées avec barres d'aluminium, 25x10 mm, peintes en gris, pour accrochage des accessoires. Articulations pour le réglage en hauteur des barres porte accessoires en matière plastique grise. Longueur utile pour l'accrochage des accessoires 55 cm. Largeur chariot 74 cm (sans accessoires).
Art. 3299115_60 Art. 3299119_60 (Linkar Compact)		Struttura superiore porta accessori, carrelli da 60 cm. Struttura realizzata con montanti in tubolare di acciaio inox lucidato, diametro 25 mm, altezza 60 cm. 2 traversi, quello inferiore regolabile in altezza, in barra di alluminio, 25x10 mm, verniciati grigio, per aggancio accessori. Morsetti in materiale plastico colore grigio. Lunghezza utile per aggancio accessori 70,5 cm. Larghezza carrello 89 cm (senza accessori). Upper accessory-holder structure for Linkar trolleys, 60 cm. Structure made of polished stainless steel tubular posts, diameter 25 mm, height 60 cm. 2 accessory holder aluminium cross bars, of which 1 fixed at the top and 1 height adjustable, 25x10 mm, painted grey. Grey plastic clamps. Working length for hanging accessories 70,5 cm. Trolley width 89 cm (without accessories).	Estructura superior porta accesorios, carros de 60 cm. Estructura fabricada con montantes de tubos de acero inoxidable pulido, de 25 mm de diámetro, 60 cm de altura, con tapones superiores de cierre. 2 traveseros de tubo de aluminio de 25x10 mm, pintados de gris para enganche de accesorios. Reguladores para la regulación en altura de las barras porta accesorios, de material plástico de color gris. Longitud útil para enganche de accesorios 70,5 cm. Ancho carro 89 cm (sin accesorios). Structure supérieure porte accessoires, chariots de 60 cm. Structure fabriquée avec des montants en tubes d'acier inox poli miroir, diamètre 25 mm, hauteur 60 cm, équipés de bouchons de fermeture dans la partie supérieure. 2 traverses fabriquées avec barres d'aluminium, 25x10 mm, peintes en gris, pour accrochage des accessoires. Articulations, pour le réglage en hauteur des barres porte accessoires, en matière plastique grise. Longueur utile pour l'accrochage des accessoires 70,5 cm. Largeur chariot 89 cm (sans accessoires).
Art. 3299115_90		Struttura superiore porta accessori, carrelli da 45+45 cm. Struttura realizzata con montanti in tubolare di acciaio inox lucidato, diametro 25 mm, altezza 60 cm. 2 traversi, quello inferiore regolabile in altezza, in barra di alluminio, 25x10 mm, verniciati grigio, per aggancio accessori. Morsetti in materiale plastico colore grigio. Lunghezza utile per aggancio accessori 96 cm. Larghezza carrello 114 cm (senza accessori). Upper accessory-holder structure for Linkar trolleys, 45+45 cm. Structure made of polished stainless steel tubular posts, diameter 25 mm, hauteur 60 cm. 2 accessory holder aluminium cross bars, of which 1 fixed at the top and 1 height adjustable, 25x10 mm, painted grey. Grey plastic clamps. Working length for hanging accessories 96 cm. Trolley width 114 cm (without accessories).	Estructura superior porta accesorios, carros de 45+45 cm. Estructura fabricada con montantes de tubos de acero inoxidable pulido, de 25 mm de diámetro, 60 cm de altura, con tapones superiores de cierre. 2 traveseros de tubo de aluminio de 25x10 mm, pintados de gris para enganche de accesorios. Reguladores para la regulación en altura de las barras porta accesorios, de material plástico de color gris. Longitud útil para enganche de accesorios 96 cm. Ancho carro 114 cm (sin accesorios). Structure supérieure porte accessoires, chariots de 45+45 cm. Structure fabriquée avec des montants en tubes d'acier inox poli miroir, diamètre 25 mm, hauteur 60 cm, équipés de bouchons de fermeture dans la partie supérieure. 2 traverses fabriquées avec barres d'aluminium, 25x10 mm, peintes en gris, pour accrochage des accessoires. Articulations pour le réglage en hauteur des barres porte accessoires en matière plastique grise. Longueur utile pour l'accrochage des accessoires 96 cm. Largeur chariot 114 cm (sans accessoires).
Art. 3299116_45 Art. 3299118_45 (Linkar Compact)		Struttura superiore, bassa, porta accessori, carrelli da 45 cm. Struttura realizzata con montanti in tubolare di acciaio inox lucidato, diametro 25 mm, altezza 30 cm. 1 traverso in barra di alluminio, 25x10 mm, verniciato grigio, per aggancio accessori. Morsetti in materiale plastico colore grigio. Lunghezza utile per aggancio accessori 55 cm. Larghezza carrello 74 cm (senza accessori). Low upper accessory-holder structure for Linkar trolleys, 45 cm. Structure made of polished stainless steel tubular posts, diameter 25 mm, height 30 cm. 1 accessory holder aluminium cross bars, 25x10 mm, painted grey. Grey plastic clamps. Working length for hanging accessories 55 cm. Trolley width 74 cm (without accessories).	Estructura superior, baja, porta accesorios, carros de 45 cm. Estructura fabricada con montantes de tubos de acero inoxidable pulido, de 25 mm de diámetro, 30 cm de altura, con tapones superiores de cierre. 1 travesero de tubo de aluminio de 25x10 mm, pintado de gris para enganche de accesorios. Reguladores para la regulación en altura de la barra porta accesorios, de material plástico de color gris. Longitud útil para enganche de accesorios 55 cm. Ancho carro 74 cm (sin accesorios). Structure supérieure, basse, porte accessoires, chariots de 45 cm. Structure fabriquée avec montants en tube d'acier inox poli miroir, diamètre 25 mm, hauteur 30 cm, équipés de bouchons de fermeture dans la partie supérieure. 1 traverse fabriquée avec une barre d'aluminium, 25x10 mm, peinte en gris, pour accrochage des accessoires. Articulations pour le réglage en hauteur des barres porte accessoires en matière plastique grise. Longueur utile pour l'accrochage des accessoires 55 cm. Largeur chariot 74 cm (sans accessoires).



Articolo - Article Artículo - Article		Descrizione  Description 	Descripción  Description 
Art. 3299116_60 Art. 3299120_60 (Linkar Compact)		Struttura superiore, bassa, porta accessori, carrelli da 60 cm. Struttura realizzata con montanti in tubolare di acciaio inox lucidato, diametro 25 mm, altezza 30 cm. 1 traverso in barra di alluminio, 25x10 mm, verniciato grigio, per aggancio accessori. Morsetti in materiale plastico colore grigio. Lunghezza utile per aggancio accessori 70,5 cm. Larghezza carrello 89 cm (senza accessori). Low upper accessory-holder structure for Linkar trolleys, 60 cm. Structure made of polished stainless steel tubular posts, diameter 25 mm, height 30 cm. 1 accessory holder aluminium cross bars, 25x10 mm, painted grey. Grey plastic clamps. Working length for hanging accessories 70,5 cm. Trolley width 89 cm (without accessories).	Estructura superior, baja, porta accesorios, carros de 60 cm. Estructura fabricada con montantes de tubos de acero inoxidable pulido, de 25 mm de diámetro, 30 cm de altura, con tapones superiores de cierre. 1 travesero de tubo de aluminio de 25x10 mm, pintado de gris para enganche de accesorios. Reguladores para la regulación en altura de las barras porta accesorios, de material plástico de color gris. Longitud útil para enganche de accesorios 70,5 cm. Ancho carro 89 cm (sin accesorios). Structure supérieure, basse, porte accessoires, chariots de 60 cm. Structure fabriquée avec des montants en tubes d'acier inox poli miroir, diamètre 25 mm, hauteur 30 cm, équipés de bouchons de fermeture dans la partie supérieure. 1 traverse fabriquée avec une barre d'aluminium, 25x10 mm, peinte en gris, pour accrochage des accessoires. Articulations, pour le réglage en hauteur des barres porte accessoires, en matière plastique grise. Longueur utile pour l'accrochage des accessoires 70,5 cm. Largeur chariot 89 cm (sans accessoires).
Art. 3299116_90		Struttura superiore, bassa, porta accessori, carrelli da 45+45 cm. Struttura realizzata con montanti in tubolare di acciaio inox lucidato, diametro 25 mm, altezza 30 cm. 1 traverso in barra di alluminio, 25x10 mm, verniciato grigio, per aggancio accessori. Morsetti in materiale plastico colore grigio. Lunghezza utile per aggancio accessori 96 cm. Larghezza carrello 114 cm (senza accessori). Low upper accessory-holder structure for Linkar trolleys, 45+45 cm. Structure made of polished stainless steel tubular posts, diameter 25 mm, h 30 cm. 1 accessory holder aluminium cross bars, 25x10 mm, painted grey. Grey plastic clamps. Working length for hanging accessories 96 cm. Trolley width 114 cm (without accessories).	Estructura superior, baja, porta accesorios, carros de 45+45 cm. Estructura fabricada con montantes de tubos de acero inoxidable pulido, de 25 mm de diámetro, 30 cm de altura, con tapones superiores de cierre. 1 traveseros de tubo de aluminio de 25x10 mm, pintados de gris para enganche de accesorios. Reguladores para la regulación en altura de las barras porta accesorios, de material plástico de color gris. Longitud útil para enganche de accesorios 96 cm. Ancho carro 114 cm (sin accesorios). Structure supérieure, basse, porte accessoires, chariots de 45+45 cm. Structure fabriquée avec montants en tube d'acier inox poli miroir, diamètre 25 mm, hauteur 30 cm. 1 traverse fabriquée avec une barre d'aluminium, 25x10 mm, peinte en gris, pour accrochage des accessoires. Articulations pour le réglage en hauteur des barres porte accessoires en matière plastique grise. Longueur utile pour l'accrochage des accessoires 96 cm. Largeur chariot 114 cm (sans accessoires).
Art. 303056_K		Asta portaflebo, regolabile in altezza, per struttura superiore. I.v. pole, height adjustable, to be fitted inside the upright of the upper accessory holder structure.	Porta suero, altura regulable, insertada en el montante vertical de la estructura superior porta accesorios. Tige porte - serum, réglable en hauteur, a inserer dans le montant de la rehausse porte - accessoires.
Art. 3299130_45 Art. 3299131_45 (Linkar Compact)		Barra aggiuntiva per struttura superiore porta accessori, cassetti da 45 cm. Realizzata in tubo di alluminio verniciato grigio a sezione rettangolare 25x10 mm. Lunghezza utile per aggancio accessori 55 cm. Larghezza carrello cm 74 (senza accessori). Additional bar for upper accessory-holder structure, 45 cm drawers. Made of painted tubular aluminium with rectangular section. Working length for hanging accessories 55 cm. Trolley width 74 cm (without accessories).	Barra adicional para estructura superior porta accesorios, cajones de 45 cm. Fabricada con tubo de aluminio pintado gris de sección rectangular 25x10 mm. Longitud útil para enganche de accesorios 55 cm. Ancho carro 74 cm (sin accesorios). Barre supplémentaire pour structure supérieure porte accessoires, tiroirs de 45 cm. Fabriquée en tube d'aluminium peint en gris à section rectangulaire 25x10 mm. Longueur utile pour l'accrochage des accessoires 55 cm. Largeur chariot 74 cm (sans accessoires).
Art. 3299130_60 Art. 3299131_60 (Linkar Compact)		Barra aggiuntiva per struttura superiore porta accessori, cassetti da 60 cm. Realizzata in tubo di alluminio verniciato grigio a sezione rettangolare 25x10 mm. Lunghezza utile per aggancio accessori 70,5 cm. Larghezza carrello cm 89 (senza accessori). Additional bar for upper accessory-holder structure, 60 cm drawers. Made of painted tubular aluminium with rectangular section. Working length for hanging accessories 70.5 cm. Trolley width 89 cm (without accessories).	Barra adicional para estructura superior porta accesorios, cajones de 60 cm. Fabricada con tubo de aluminio pintado gris de sección rectangular 25x10 mm. Longitud útil para enganche de accesorios 70,5 cm. Ancho carro 89 cm (sin accesorios). Barre supplémentaire pour structure supérieure porte accessoires, tiroirs de 60 cm. Fabriquée en tube d'aluminium peint en gris à section rectangulaire 25x10 mm. Longueur utile pour l'accrochage des accessoires 70,5 cm. Largeur chariot 89 cm (sans accessoires).
Art. 3299130_90		Barra aggiuntiva per struttura superiore porta accessori, cassetti da 45+45 cm. Realizzata in tubo di alluminio verniciato grigio a sezione rettangolare 25x10 mm. Lunghezza utile per aggancio accessori 96 cm. Larghezza carrello cm 114 (senza accessori). Additional bar for upper accessory-holder structure, 45+45 cm drawers. Made of painted tubular aluminium with rectangular section. Working length for hanging accessories 96 cm. Trolley width 114 cm (without accessories).	Barra adicional para estructura superior porta accesorios, cajones de 45+45 cm. Fabricada con tubo de aluminio pintado gris de sección rectangular 25x10 mm. Longitud útil para enganche de accesorios 96 cm. Ancho carro 114 cm (sin accesorios). Barre supplémentaire pour structure supérieure porte accessoires, tiroirs de 45+45 cm. Fabriquée en tube d'aluminium peint en gris à section rectangulaire 25x10 mm. Longueur utile pour l'accrochage des accessoires 96 cm. Largeur chariot 114 cm (sans accessoires).
Art. 3299135		Kit superiore a 9 (5+4) cassettini a ribalta, per struttura superiore porta accessori dim. ingombro cm 60x17x36 h. Realizzati in materiale plastico trasparente, agganciati alle barre porta accessori. Dim. cassetteria a 5 cassetti cm 60x13.3x16,4 h. Dim. cassettera a 4 cassetti cm 60x17x20,6 h. Il kit è agganciabile alla struttura superiore art.3299115_45, art.3299115_60, art.3299115_90. Top kit of 9 (5+4) flap-down drawers, for upper accessory-holder structure, total dim. cm 60x17x36 h. Top kit of 9 flap-down drawers made of transparent plastic, hooked onto the accessory-holder bars. dim. 5 drawer unit 60x13.3x16,4 h dim. 4 drawer unit 60x17x20,6 h. The kit can be hooked onto the upper structure art.3299115_45, art.3299115_60, art.3299115_90.	Kit superior de 9 (5+4) cajones basculantes, para estructura superior porta accesorios dim. 60x17x36 h cm. Fabricados con material plástico transparente, enganchados a las barras porta accesorios. Dim. cajonera de 5 cajones 60x13.3x16,4 h cm. Dim. cajonera de 4 cajones 60x17x20,6 h cm. El kit se engancha a la estructura superior art.3299115_45, art.3299115_60, art.3299115_90. Set supérieur à 9 (5+4) tiroirs rabattables, pour structure supérieure dim. encombrement cm 60x17x36 h. Fabriqués en matière plastique transparente, accrochés à la barre porte accessoires. Dim. Meuble à tiroirs à 5 tiroirs cm 60x13.3x16,4 h. Dim. Meuble à tiroirs à 4 tiroirs cm 60x17x20,6 h. Le set peut être accroché à la structure supérieure art.3299115_45, art.3299115_60, art.3299115_90.
Art. 3299136		Kit 4 cassettini, a ribalta, per struttura superiore porta accessori dim. cm 60x17x20,6 h. Realizzati in materiale plastico trasparente, agganciati alle 2 barre porta accessori. Kit of 4 flap-down drawers, for upper accessory-holder structure, dim. cm 60x17x20,6 h. Kit of flap-down drawers made of transparent plastic, hooked onto the 2 accessory-holder bars.	Kit 4 cajones basculantes, para estructura superior porta accesorios dim. cm 60x17x20,6 h. Fabricados con material plástico transparente, enganchados a las 2 barras porta accesorios. Set de 4 petits tiroirs, rabattables, pour structure supérieure porte accessoires dim. cm 60x17x20,6 h. Fabriqués en matière plastique transparente, accrochés à les 2 barres porte accessoires.
Art. 3299137		Kit 4+4 cassettini, a ribalta, per struttura superiore porta accessori dim. cm 60x17x41,2h. Realizzati in materiale plastico trasparente, agganciate alle 2 barre porta accessori. Kit of 4+4 flap-down drawers, for upper accessory-holder structure, dim. cm 60x17x41,2h. Kit of flap-down drawers made of transparent plastic, hooked onto the 2 accessory-holder bars.	Kit 4+4 cajones basculantes, para estructura superior porta accesorios dim. cm 60x17x41,2h. Fabricados con material plástico transparente, enganchados a las 2 barras porta accesorios. Set de 4+4 petits tiroirs, rabattables, pour structure supérieure porte accessoires dim. cm 60x17x41,2h. Fabriqués en matière plastique transparente, accrochés à les 2 barres porte accessoires.

Articolo - Article Artículo - Article		Descrizione  Description 	Descripción  Description 
Art. 3299140		Elemento pensile a 40 celle, per struttura superiore porta accessori dim. cm 61,8x15,3x63,5 h. Realizzato in plexiglass, per l'inserimento di scatole per sutura composta da 8 file con 5 posizioni ciascuna per un totale di 40 celle di cm 12x15x7 h. L'elemento è agganciabile alla struttura superiore art.3299115_45, art.3299115_60, art.3299115_90. Hanging element of 40 cells for upper accessory-holder structure, dim. cm 61,8x15,3x63,5 h. Hanging structure made of plexiglass, for suture boxes, consisting of 8 rows with 5 positions each, making a total of 40 cells cm 12x15x7 h. The element can be hooked onto the upper structure art.3299115_45, art.3299115_60, art.3299115_90.	Elemento colgante de 40 celdas para estructura superior porta accesorios dim. 61,8x15,3x63,5 h cm. Fabricado con plexiglás, para la inserción de cajas para sutura compuesta de 8 filas con 5 posiciones cada una por un total del 40 celdas de 12x15x7 h cm. El elemento se engancha a la estructura superior art.3299115_45, art.3299115_60, art.3299115_90. Meuble suspendu à 40 cellules, pour structure supérieure porte accessoires dim. cm 61,8x15,3x63,5 h. Fabriqué en plexiglas, pour le rangement de boîtes avec matériel de suture se composant de 8 rangées avec 5 positions chacune pour un total de 40 cellules de cm 12x15x7 h. L'élément peut être accroché à la structure supérieure art.3299115_45, art.3299115_60, art.3299115_90.
Art. 3299145		Doppio gancio portafebo per tubo struttura superiore porta accessori. Supporto porta flebo a 2 ganci, regolabile in altezza, per tubo struttura superiore porta accessori, in tondino di acciaio plastificato. Double i.v. hook for upper accessory-holder structure tube. Adjustable height i.v. pole with 2 hooks, for upper accessory-holder structure tube, in plastic-coated steel rod.	Doble gancho porta suero para tubo estructura superior porta accesorios. Soporte porta suero de 2 ganchos, regulable en altura, para tubo estructura superior porta accesorio, de alambre de acero plastificado. Double crochet porte sérum pour structure supérieure porte accessoires. Support porte sérum à 2 crochets, réglable en hauteur, pour tube structure supérieure porte accessoires, en tube d'acier rond plastifié.
Art. 3299155		Supporto per bacinella reniforme su tubo struttura superiore porta accessori (bacinella esclusa). Supporto, regolabile in altezza, per struttura superiore porta accessori, in tondino di acciaio plastificato. Support for kidney dish on upper accessory-holder. structure tube (dish excluded). Adjustable height support for upper accessory-holder structure, in plastic-coated steel rod.	Soporte para cubeta riñonera para tubo estructura superior porta accesorios (palangana excluida). Soporte regulable en altura, para estructura superior porta accesorios, de alambre de acero plastificado. Support pour bassin réniforme sur tube structure supérieure porte accessoires (bassin non compris). Support, réglable en hauteur, pour tube structure supérieure porte accessoires, en tube d'acier rond plastifié.
Art. 3299160		Vaschetta disinfezione strumenti con supporto per tubo struttura superiore porta accessori. Vaschetta arrotondata, in conformità all'uso specifico, in plastica rigida molto resistente e sterilizzabile. Completa di supporto: in tondino di acciaio plastificato. coperchio: chiude perfettamente la vaschetta. Fornibile liscio o con fenditura trasversale per l'immissione di piccoli strumenti. Setaccio nella vaschetta per togliere gli strumenti sgocciolanti. Capacità: 3 litri di liquido disinfettante. Instrument disinfection basin with support for upper accessory-holder structure tube. Rounded basin, in compliance with the specific use, made of highly resistant and sterilizable rigid plastic. Complete with support in plastic-coated steel rod. The lid closes the basin perfectly and may be supplied smooth or with a transverse slot to insert small instruments. Strainer integrated in the basin to extract dripping instruments. Capacity: 3 litres of disinfectant liquid.	Recipiente desinfección instrumentos con soporte para tubo estructura superior porta accesorios. Recipiente redondeado, en conformidad con el uso específico, de plástico rígido muy resistente para esterilizar. Completo con soporte: de alambre de acero plastificado. Tapa: cierra perfectamente el recipiente. Se puede entregar liso o con ranuras transversales para la introducción de pequeños instrumentos. Colador en el recipiente para quitar los instrumentos que gotean. Capacidad: 3 litros de líquido desinfectante. Récipient de désinfection instruments avec support pour tube structure supérieure porte accessoires. Récipient rond, adapté à l'usage spécifique, en plastique rigide très résistant et stérilisable. Équipé de support : en tube d'acier rond plastifié, couvercle : ferme parfaitement le récipient. Peut être fourni avec ou sans ouverture transversale pour l'introduction de petits instruments. Tamis dans le récipient pour ôter les instruments dégoûlinants. Capacité : 3 litres de liquide désinfectant.
Art. 3299165		Supporto universale per tubo struttura superiore porta accessori (contenitore escluso) . Realizzato in tondino di acciaio plastificato con cinghia in velcro regolabile al contenitore. lunghezza cinghia cm 63. Agganciabile al tubo della struttura superiore porta accessori. Universal support for upper accessory-holder structure tube (container excluded) . Made of plastic-coated steel rod with velcro strap adjustable to the container. strap length 63 cm. can be hooked onto the upper accessory-holder structure tube.	Soporte universal para tubo estructura superior porta accesorios (contenedor excluido) . Realizado con alambre de acero plastificado con correa de velcro regulable al contenedor, longitud correa 63 cm. Se puede enganchar al tubo de la estructura superior porta accesorios. Support universel pour tube structure supérieure porte accessoires (réipient non compris) . Fabriqué en tube d'acier rond plastifié avec courroie en velcro pour réglage sur le récipient. Longueur courroie 63 cm. Accrochable au tube de la structure supérieure porte accessoires.
Art. 3299165B		Supporto universale per barra laterale (contenitore escluso) . Realizzato in tondino di acciaio verniciato con cinghia in velcro regolabile al contenitore. Lunghezza cinghia cm 63. Agganciabile alla barra sul fianco laterale del carrello. Universal support for side bar (container excluded) . Made of painted steel rod with velcro strap adjustable to the container. strap length 63 cm. can be hooked onto the bar on the side of the trolley.	Soporte universal para barra lateral (contenedor excluido) . Fabricado con alambre de acero pintado con correa de velcro regulable al contenedor. Longitud correa 63 cm. Se puede enganchar a la barra al costado del carro. Support universel pour barre latérale (réipient non compris) . Fabriqué en tube rond d'acier plastifié avec courroie en velcro pour réglage sur le récipient. Longueur courroie 63 cm. Accrochable à la barre sur le côté du chariot.
Art. 3299165_810		Supporto universale per tubo struttura superiore porta accessori (lunghezza cinghia 81cm). (contenitore escluso) . Realizzato in tondino di acciaio plastificato con cinghia in velcro regolabile al contenitore. Lunghezza cinghia cm 81. Agganciabile al tubo della struttura superiore porta accessori. Universal support for upper accessory-holder structure tube, (strap length 81 cm). (container excluded) . Made of plastic-coated steel rod with velcro strap adjustable to the container. strap length 81 cm. can be hooked onto the upper accessory-holder structure tube.	Soporte universal para tubo estructura superior porta accesorios (longitud correa 81 cm) (contenedor excluido) . Fabricado con alambre de acero plastificado con correa de velcro regulable al contenedor. Longitud correa 81 cm. Se puede enganchar al tubo de la estructura superior porta accesorios. Support universel pour tube structure supérieure porte accessoires (Longueur courroie 81 cm) (réipient non compris) . Fabriqué en tube rond d'acier plastifié avec courroie en velcro pour réglage sur le récipient. Longueur courroie 81 cm. Accrochable au tube de la structure supérieure porte accessoires.
Art. 3299165B_810		Supporto universale per barra laterale (lunghezza cinghia 81 cm). (contenitore escluso) . Realizzato in tondino di acciaio verniciato con cinghia in velcro regolabile al contenitore. lunghezza cinghia cm 81. Agganciabile alla barra sul fianco laterale del carrello. Universal support for side bar , (strap length 81 cm). (container excluded) . Made of painted steel rod with Velcro strap adjustable to the container. Strap length 81 cm. Can be hooked onto the bar on the side of the trolley.	Soporte universal para barra lateral (longitud correa 81 cm) (contenedor excluido) . Realizado con alambre de acero pintado con correa de velcro regulable al contenedor, longitud correa 81 cm. Se puede enganchar a la barra al costado del carro. Support universel pour barre latérale (longueur courroie 81 cm) (réipient non compris) . Fabriqué en tube rond d'acier plastifié avec courroie en velcro pour réglage sur le récipient. Longueur courroie 81 cm. Accrochable au tube de la structure supérieure porte accessoires.
Art. 3299340		Contenitore giallo per piccoli rifiuti. Yellow container for small waste.	Contenedor amarillo para residuos pequeños. Récipient jaune pour déchets de petites dimensions.

Articolo - Article Artículo - Article		Descrizione  Description 	Descripción  Description 
Art. 3299170		Dispenser disinfettante per barre struttura superiore porta accessori o per barre laterali. Disinfectant dispenser for upper accessory-holder structure bars or for side bars.	Dispensador de desinfectante para barras estructura superior porta accesorios o para barras laterales Distributeur de désinfectant pour barres structure supérieure porte accessoires ou pour barres latérales.
Art. 3299175		Aprifiale per barre struttura superiore porta accessori o per barre laterali. Ampoule opener for upper accessory-holder structure bars or for side bars.	Abridor de ampollas para barras estructura superior porta accesorios o para barras laterales. Ouvre-ampoules pour barres structure supérieure porte accessoires ou pour barres latérales.
Art. 3299180		Mensola inox, con un divisorio, per barra struttura superiore porta accessori dim. cm 27x18x3/5h. Realizzata in acciaio aisi 304, con un divisorio in plexiglass. Stainless steel shelf with 1 divider, for upper accessory-holder structure bar, dim. cm 27x18x3/5h. Shelf made of aisi 304 stainless steel, with one plexiglas divider.	Repisa de inox, con un divisor, para barra estructura superior porta accesorios dim. 27x18x3/5h cm. Fabricada de acero aisi 304, con divisor de plexiglás. Étagère inox, avec un séparateur, pour barre structure supérieure porte accessoires dim. cm 27x18x3/5h. Fabriquée en acier aisi 304, avec un séparateur en plexiglas.
Art. 3299185*		Mensola grande inox, con tre divisori, per barra struttura superiore porta accessori dim. cm 54,5x18x3/5h. Realizzata in acciaio aisi 304, con tre divisori in plexiglass. Large stainless steel shelf with 3 dividers, for upper accessory-holder structure bar, dim. cm 54,5x18x3/5h. Shelf made of aisi 304 stainless steel, with three plexiglas dividers.	Repisa grande de inox, con tres divisores, para barra estructura superior porta accesorios dim. 54,5x18x3/5h cm. Fabricada de acero aisi 304, con tres divisores de plexiglás. Grande étagère inox, avec trois séparateurs, pour barre structure supérieure porte accessoires dim. cm 54,5x18x3/5h. Fabriquée en acier aisi 304, avec trois séparateurs en plexiglas.
Art. 3299195		Cestello in filo di acciaio per barre struttura superiore porta accessori o per barre laterali. Realizzato in tondino di acciaio verniciato. Dim. cm 45x17x14/17 h. Steel wire basket for upper accessory-holder structure bars or for side bars. Made of painted steel rod. Dim. cm 45x17x14/17 h.	Cesto de alambre de acero para barras estructura superior porta accesorios o para barras laterales. Fabricado con alambre de acero pintado. Dim. cm 45x17x14/17 h. Panier en fil d'acier pour barres structure supérieure porte accessoires ou pour barres latérales. Fabriqué en tube rond d'acier plastifié. Dim. cm 45x17x14/17 h.
Art. 3299200		Supporto porta bottiglie/flaconi per barre struttura superiore porta accessori o per barre laterali. Realizzato in tondino di acciaio verniciato. Bottle support for upper accessory-holder structure bars or for side bars. Made of painted steel rod.	Soporte porta botellas/frascos para barras estructura superior porta accesorios o para barras laterales. Fabricado con alambre de acero pintado. Support porte bouteilles/flacons pour barres structure supérieure porte accessoires ou pour barres latérales. Fabriqué en tube rond d'acier peint.
Art. 3299205		Supporto contenitore secreti per barre laterali. Realizzato in tondino di acciaio verniciato. Support for secretions container for side bars. Made of painted steel rod.	Soporte contenedor secretos para barras laterales. Fabricado con alambre de acero pintado. Support conteneur secrets pour barres latérales. Fabriqué en tube rond d'acier peint.
Art. 3299210		Alloggio pompa aspirazione per barre laterali. Realizzato in tondino di acciaio verniciato. Suction pump housing for side bars. Made of painted steel rod.	Compartimento bomba aspiración para barras laterales. Fabricado con alambre de acero pintado. Logement pompe aspiration pour barres latérales. Fabriqué en tube rond d'acier peint.
Art. 3299215		Porta sonde/cateteri per barre laterali. Realizzato in tondino di acciaio verniciato. Probe/catheter holders for side bars. Made of painted steel rod.	Porta sondas/catéteres para barras laterales. Fabricado con alambre de acero pintado. Porte sondes/cathéters pour barres latérales. Fabriqué en tube rond d'acier peint.
Art. 3299216*		Porta sonde/cateteri per aggancio frontale (per carrelli da 45 e 60 cm). Probe/catheter holders for front side, trolley 45 and 60 range.	Porta sondas/cateteres, frontal, para carro 45 y 60 cm. Porte sondes ou cathéters frontal, chariot 45 et 60 cm.
Art. 3299220		Avvolgicavo per barre struttura superiore porta accessori o per barre laterali. Realizzato in tondino di acciaio verniciato. Cable winder for upper accessory-holder structure bars or for side bars. Made of painted steel rod.	Enrollador de cable para barras estructura superior porta accesorios o para barras laterales. Fabricado con alambre de acero pintado. Enrouler de câbles pour barres structure supérieure porte accessoires ou pour barres latérales. Fabriqué en tube rond d'acier peint.
Art. 3299225_45 Art. 3299226_45 (Linkar Compact)		Copertura trasparente realizzata in policarbonato per piano; per struttura con cassetti da 45 cm. Larghezza carrello cm 74 (senza accessori). Transparent cover in polycarbonate for Linkar trolleys, shaped to match the top; for trolleys with 45 cm drawers. Trolley width 74 cm (without accessories).	Cubierta transparente de policarbonato para superficie de trabajo; para estructura con cajones de 45 cm. Ancho carro 74 cm (sin accesorios).
Art. 3299225_60 Art. 3299226_60 (Linkar Compact)		Copertura trasparente realizzata in policarbonato per piano; per struttura con cassetti da 60 cm. Larghezza carrello cm 89 (senza accessori). Transparent cover in polycarbonate for Linkar trolleys, shaped to match the top; for trolleys with 60 cm drawers. Trolley width 89 cm (sans accessoires).	Cubierta transparente de policarbonato para superficie de trabajo; para estructura con cajones de 60 cm. Ancho carro 89 cm (sin accesorios).
Art. 3299225_90		Copertura trasparente realizzata in policarbonato per piano; per struttura con cassetti da 45+45 cm. Larghezza carrello cm 114 (senza accessori). Transparent cover in polycarbonate for Linkar trolleys, shaped to match the top; for trolleys with 45+45 cm drawers. Trolley width 114 cm (without accessories).	Cubierta transparente de policarbonato para superficie de trabajo; para estructura con cajones de 45+45 cm. Ancho carro 114 cm (sin accesorios).

* Non compatibile con Linkar Compact - Not compatible with Linkar Compact - No compatible con Linkar Compact - Non compatible avec Linkar Compact

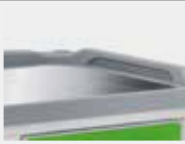Articolo - Article Artículo - Article		Descrizione  Description 	Descripción  Description 
Art. 3299230		Kit ciabatta magnetotermica 4 prese elettriche con avvolgicavo per barre struttura superiore porta accessori o per barre laterali. Multiple socket kit with overload protection, 4 power sockets and cable winder for upper accessory-holder structure bars or for side bars.	Kit regleta magnetotérmica 4 tomas eléctricas con enrollador de cable para barras estructura superior porta accesorios o para barras laterales. Set bloc multiprises 4 prises avec enrouleur de câbles pour barres structure supérieure porte accessoires ou pour barres latérales.
Art. 3299235		Leva aghi con supporto per barre struttura superiore porta accessori o per barre laterali. Needle remover with support for upper accessory-holder structure bars or for side bars.	Extractor agujas con soporte para barras estructura superior porta accesorios o para barras laterales. Ôte-aiguilles avec support pour barres structure supérieure porte accessoires ou pour barres latérales.
Art. 3299245		Contenitori strumenti in acciaio inox per barre struttura superiore porta accessori o per barre laterali. Stainless steel instrument containers for upper accessory-holder structure bars or for side bars.	Contenedor instrumentos de acero inox para barras estructura superior porta accesorios o para barras laterales. Récipients pour contenir instruments en acier inox pour barres structure supérieure porte accessoires ou pour barres latérales.
Art. 3299250		Bacinella in acciaio inox con supporto per tubo struttura superiore porta accessori. Realizzata interamente in acciaio inox aisi 304. Supporto in tondino di acciaio plastificato. Stainless steel tray with support for upper accessory-holder structure tube. Tray made entirely of AISI 304 stainless steel. Support made of plastic-coated steel rod.	Recipiente de acero inoxidable con soporte para tubo estructura superior porta accesorios. Realizado totalmente de acero inox. aisi 304. Soporte con alambre de acero plastificado. Bassin en acier inox avec support pour tube structure supérieure porte accessoires. Fabriquée complètement en acier inox aisi 304. Support en tube d'acier rond plastifié.
Art. 3299255		Supporto scatola guanti per struttura superiore porta accessori o per barre laterali. Lunghezza 15 cm. Agganciabile sulla barra della struttura superiore o alla barra sul fianco laterale del carrello. Support for box of gloves for upper accessory-holder structure or for side bars. Length 15 cm can be hooked onto the bar on the upper structure or the bar on the side of the trolley.	Soporte caja guantes para estructura superior porta accesorios o para barras laterales. Longitud 15 cm. Se puede enganchar a la barra de la estructura superior o a la barra al costado del carro. Support boite distribution gants pour structure supérieure porte accessoires ou pour barres latérales. Longueur 15 cm. Accrochable sur la barre de la structure supérieure ou à la barre sur le côté du chariot.
Art. 3299270		Cestino portarifiuti, con apertura a ginocchio, capacità 20 lt per barre laterali. Realizzato in materiale plastico colore grigio chiaro. Waste bin with knee opening system, 20 lt capacity, for side bars. Made of light grey plastic.	Cubo basura, capacidad 20 litros para barras laterales abertura con la rodilla. Fabricado con material plástico color gris claro. Corbeille à déchets, capacité 20 litres pour barres latérales avec ouverture articulée. En matière plastique gris clair.
Art. 3299275		Cestino portarifiuti, con apertura a ginocchio, capacità 10 lt per barre laterali (massimo 2 affiancabili). Realizzato in materiale plastico colore grigio chiaro. Waste bin with knee opening system, 10 lt capacity, for side bars (max 2 juxtaposable). Made of light grey plastic.	Cubo basura, capacidad 10 litros para barras laterales abertura con la rodilla (max 2 acoplables). Fabricado con material plástico color gris claro. Corbeille à déchets, capacité 10 litres pour barres latérales avec ouverture articulée (max 2 accouplables). En matière plastique gris clair.
Art. 3299280		Supporto per scatola raccolta rifiuti speciali ospedalieri. Solo per lato dx dove non sono presenti le barre laterali. Support for special hospital waste collection box. Only for the right side where there are no side bars.	Soporte para cajas recolección residuos hospitalarios especiales. Sólo para lado dch. en ausencia de barras laterales. Support pour récipient de grande dimension pour récolte de déchets spéciaux hospitaliers. Seulement pour le côté droit où il n'y a pas les barres latérales.
Art. 3299310		Maggiorazione per kit 2 ruote antistatiche. Surcharge for 2 antistatic wheels kit.	Aumento para kit 2 ruedas antiestáticas. Supplément pour set 2 roulettes antistatiques.
Art. 3299325_45 Art. 3299326_45 (Linkar Compact)		Copertura in acciaio inox per piano; per struttura con cassetti da 45 cm. Larghezza carrello cm 74 (senza accessori). Stainless steel cover for Linkar trolleys, shaped to match the top; for trolleys with 45 cm drawers. Trolley width 74 cm (without accessories).	Cubierta de acero inoxidable para superficie de trabajo; para estructura con cajones de 45 cm. Ancho carro 74 cm (sin accesorios). Couverture en acier inox pour plan ; pour structure avec tiroirs de 45 cm. Largeur chariot 74 cm (sans accessoires).
Art. 3299325_60 Art. 3299326_60 (Linkar Compact)		Copertura in acciaio inox per piano; per struttura con cassetti da 60 cm. Larghezza carrello cm 89 (senza accessori). Stainless steel cover for Linkar trolleys, shaped to match the top; for trolleys with 60 cm drawers. Trolley width 89 cm (without accessories).	Cubierta de acero inoxidable para superficie de trabajo; para estructura con cajones de 60 cm. Ancho carro 89 cm (sin accesorios). Couverture en acier inox pour plan ; pour structure avec tiroirs de 60 cm. Largeur chariot 89 cm (sans accessoires).
Art. 3299325_90		Copertura in acciaio inox per piano; per struttura con cassetti da 45+45 cm. Larghezza carrello cm 114 (senza accessori). Stainless steel cover for Linkar trolleys, shaped to match the top; for trolleys with 45+45 cm drawers. Trolley width 114 cm (without accessories).	Cubierta de acero inoxidable para superficie de trabajo; para estructura con cajones de 45+45 cm. Ancho carro 114 cm (sin accesorios). Couverture en acier inox pour plan ; pour structure avec tiroirs de 45+45 cm. Largeur chariot 114 cm (sans accessoires).
Art. 3299330		Kit sigilli numerati per chiusura cassetti 100 pz. Kit of numbered seals - 100 pcs.	Kit precintos numerados para cierre cajones unidades 100. Set de sceaux numérotés pour fermeture tiroirs 100 pièces.

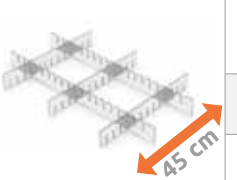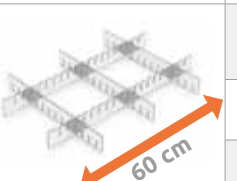Articolo - Article Artículo - Article		Descrizione  Description 	Descripción  Description 
Art. 3299334_60		Kit etichette colorate sistema broselow, cassetti da 60 cm. Larghezza carrello cm 89 (senza accessori). Kit of broselow system coloured labels for Linkar trolleys, 60 cm drawers . Trolley width 89 cm (without accessories).	Kit etiquetas de color sistema broselow, cajones de 60 cm. Ancho carro 89 cm (sin accesorios). Set étiquettes en couleur système broselow, tiroirs de 60 cm. Large ur chariot 89 cm (sans accessoires).
Art. 3299355		Tubo di supporto accessori per piano di lavoro. Diametro 25 mm, lunghezza 30 cm. Accessory support tube for worktop. Tube, diameter 25 mm, length 30 cm.	Tubo soporte accesorios para superficie de trabajo. Diámetro 25 mm, longitud 30 cm. Tube de support accessoires pour plan de travail. Diamètre 25 mm, longueur 30 cm.
Art. 3299915_45		Kit divisori per cassetto con larghezza 45 cm, h 7,5 cm. Divider kit for drawer with width 45 cm, h 7,5 cm.	Kit divisorios para cajón 45 cm, de ancho h 7,5 cm. Set de diviseurs de tiroirs largeur 45 cm, h 7,5 cm.
Art. 3299916_45		Kit divisori per cassetto con larghezza 45 cm, h 15 cm. Divider kit for drawer with width 45 cm, h 15 cm.	Kit divisorios para cajón 45 cm, de ancho h 15 cm. Set de diviseurs de tiroirs largeur 45 cm, h 15 cm.
Art. 3299917_45		Kit divisori per cassetto con larghezza 45 cm, h 22,5 cm. Divider kit for drawer with width 45 cm, h 22,5 cm.	Kit divisorios para cajón 45 cm, de ancho h 22,5 cm. Set de diviseurs de tiroirs largeur 45 cm, h 22,5 cm.
Art. 3299915_60		Kit divisori per cassetto con larghezza 60 cm, h 7,5 cm. Divider kit for drawer with width 60 cm, h 7,5 cm.	Kit divisorios para cajón 60 cm de ancho, de ancho h 7,5 cm. Set de diviseurs de tiroirs largeur 60 cm, h 7,5 cm.
Art. 3299916_60		Kit divisori per cassetto con larghezza 60 cm, h 15 cm. Divider kit for drawer with width 60 cm, h 15 cm.	Kit divisorios para cajón 60 cm, de ancho h 15 cm. Set de diviseurs de tiroirs largeur 60 cm, h 15 cm.
Art. 3299917_60		Kit divisori per cassetto con larghezza 60 cm, h 22,5 cm. Divider kit for drawer with width 60 cm, h 22,5 cm.	Kit divisorios para cajón 60 cm, de ancho h 22,5 cm. Set de diviseurs de tiroirs largeur 60 cm, h 22,5 cm.
Art. 3299920		Portacartelle sospese per formato A4, al pezzo. Realizzata in materiale plastico, dimensioni cm 33x25 h. Hanging file folders for A4 format, per piece. Made of plastic, dimensions cm 33x25 h.	Porta carpetas suspendidas para formato A4, la pieza. Fabricado con material plástico, dimensiones en cm 33x25 h. Porte dossiers suspendus pour format A4, pièce. Fabriqué en matière plastique, dimensions cm 33x25 h.
Art. 3299921		Portacartelle sospese per formato A3, al pezzo. Realizzata in materiale plastico, dimensioni cm 45,5x31 h. Hanging file folders for A3 format, per piece. Made of plastic, dimensions cm 45,5x31 h.	Porta carpetas suspendidas para formato A3, la pieza. Fabricado con material plástico, dimensiones en cm 45,5x31 h. Porte dossiers suspendus pour format A3, pièce. Fabriqué en matière plastique, dimensions cm 45,5x31 h.
Art. 303336		Nastro Broselow. Broselow guidelines.	Cinta Broselow. Bande Broselow.
Art. 3299924_45		Kit 10 etichette per cassetti con larghezza 45 cm. Kit of 10 labels for drawer with width 45 cm.	Kit 10 etiquetas para cajón 45 cm de ancho. Jeu 10 étiquettes de tiroirs largeur 45 cm.
Art. 3299924_60		Kit 10 etichette per cassetti con larghezza 60 cm. Kit of 10 labels for drawer with width 60 cm.	Kit 10 etiquetas para cajón 60 cm de ancho. Jeu 10 étiquettes de tiroirs largeur 60 cm.
Art. 3299300		Pianetto abbattibile laterale. Flap-down board.	Superficie de trabajo abatible lateral. Étagère latérale rabattable.
Art. 3299360		Chiave passepartout master. Master key.	Llave Maestra. Clé Passe-partout.
Art. AB00197		Serratura elettronica a badge. Lock with badges.	Cierre electrónico con tarjeta magnética. Serrure electronique a badge.

L'azienda si riserva di apportare ai suoi prodotti, senza alcun preavviso, tutte le modifiche tecniche e/o estetiche ritenute opportune.
The Company reserves the right to introduce at the technical and/or aesthetic modifications deemed necessary to their products without prior notice.
La empresa se reserva el derecho de aportar a sus productos, sin previo aviso, todas las modificaciones técnicas y/o estéticas consideradas oportunas.
La société se réserve le droit d'apporter à ses produits les modifications techniques et/ou esthétiques considérées opportunes sans être tenue d'en donner préavis.

MALVESTIO S.p.A.

Via G. Marconi, 12 D - 35010
Villanova - Padova - Italy
Tel. +39 049 9299511
Fax +39 049 9299500
info@malvestio.it
export@malvestio.it



malvestio.it



ISO 9001
ISO 13485



MALVESTIO²⁰

L'azienda si riserva di apportare ai suoi prodotti, senza alcun preavviso, tutte le modifiche tecniche e/o estetiche ritenute opportune.

The Company reserves the right to introduce all the technical and/or aesthetic modifications deemed necessary to their products without prior notice.

La empresa se reserva el derecho de aportar a sus productos, sin previo aviso, todas las modificaciones técnicas y/o estéticas consideradas oportunas.

La société se réserve le droit d'apporter à ses produits les modifications techniques et/ou esthétiques considérées opportunes sans être tenue d'en donner préavis.

Graphic design by MMBF

Printed by Grafiche Antiga on January 2020

Copies n° 2500 - Revision n° 02

 **MALVESTIO[®]**
Made in Italy